

# Elvido-Vervo

Clinic | **Care** | Assist





**EXTRA** diepgang.  
De nieuwe Elvido-Vervo.

Nieuw  
**VERSTELBEREIK**  
van **25** tot  
**80** cm



Het **VOORNAAMSTE**  
in het **KORT!**

- Hoogste positie tot 80 cm = ergonomisch voor het personeel
- Laagste positie tot 25 cm = valpreventie
- Zeer goede verrijdbaarheid in iedere positie
- OpenBus-techniek = de digitale toekomst van de verpleegbedden

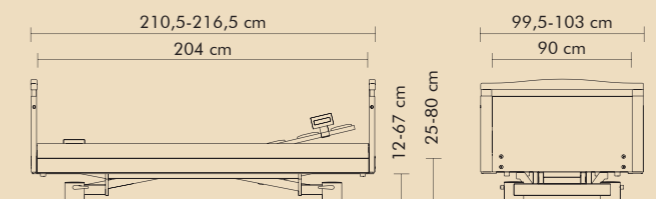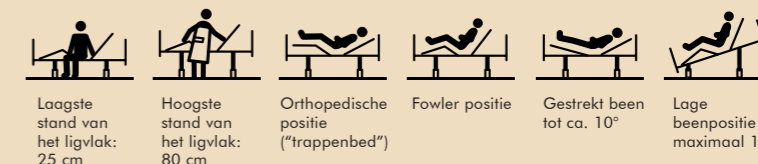

**De kwadratuur van de cirkel:  
Steeds verder NAAR BOVEN En tegelijkertijd  
steeds verder NAAR BENEDEN.**

Wij verheugen ons met de Elvido Vervo een technisch perfect en naar eigen stijl gevonden antwoord te hebben op een grote uitdaging binnen de verpleging: het Elvido-Vervo kan niet alleen tot op een ergonomische hoogte van 80 cm (foto 1) worden gebracht, maar ook tot op een veilige 25 cm (grote afbeelding en foto 2) worden neergelaten – ideaal voor de bewoner! Een innovatie, die het tot nu bestaande belangenconflict tussen de ergonomische werkhogte voor de verpleging en de voor de valpreventie belangrijke diepte voor de bewoner, tot ieders tevredenheid oplost.

Daarbij gaat de hoogverstelling met krachtige motoren zeer snel en beschikt het bed tevens over een functie die bescherming tegen inklemmen aan het voeteneinde biedt, ook bij een uitgetrokken bedverlenging. Het bed wordt dankzij een automatische hoogtecompensatie altijd absoluut horizontaal en verticaal veresteld.

**LAAG betekent veilig en comfortabel.**

Voor de bewoners kan een verpleegbed lang niet laag genoeg zijn – hoe lager, hoe beter: het valrisico wordt verkleind en als het dan toch tot een valpartij komt, zijn de gevolgen beduidend minder ernstig. Gelijktijdig wordt het in- en

uitstappen voor sommige bewoners heel wat gemakkelijker als ze minder hoogte moeten overwinnen. En: een bed met minder hoogte zorgt ook voor een behaaglijk gevoel in de kamer net zoals thuis.

**HOOG is ergonomischer en beter voor de rug!**

Voor de zorgverleners kan een bed nauwelijks hoog genoeg zijn want het werk wordt beduidend gemakkelijker en is ontlastend voor de rug omdat men niet in een gebukte houding

moet werken. De Elvido-Vervo kan snel en stabiel tot 80 cm omhoog gebracht worden.



VALPREVENTIE  
Laag  
VERSTELBEREIK  
tot  
**25 cm**  
VALPREVENTIE

RUGONTLASTEND  
Hoog  
VERSTELBEREIK  
tot  
**80 cm**  
RUGONTLASTEND

# Alles is mogelijk!

## De OpenBus is er - STANDAARD

Het verpleegbed is in de digitale toekomst aangekomen: OpenBus maakt de vorming van een digitaal netwerk en de besturing van diverse systemen mogelijk. In de toekomst zal een groot aantal sensoren intelligent gegevens registreren en doorgeven – rechtstreeks aan de zorgverleners, draadloos of in het telefoonnetwerk. De digitale toekomst kent nauwelijks beperkingen en Stieglmeyer-bedden zijn klaar voor de eerste bouwstenen van de digitalisering.

## INFRAROOD-AFSTANDSBEEDIENING\*

Waar geen kabel is, kan ook niets verward raken of knikken. De draadloze afstandsbediening is comfortabeler en veiliger omdat er geen kabel van de handbediening meer is (grote afbeelding).

## SCHITTEREND VOORBEELD

De leeslamp\* krijgt via de geïntegreerde lampaansluiting\* gemakkelijk contact en wordt direct via het OpenBus-systeem bestuurd en van stroom voorzien – zo heeft ze daarom ook geen transformator meer nodig en lastige kabels behoren ook tot het verleden. En: er wordt een stopcontact gespaard (foto 1).

## ONDERBEDVERLICHTING\*

De onderbedverlichting\* dient een veilige oriëntering nachts en vermijdt het valrisico. Gelijktijdig is het licht zo stemmig, dat de bedbuur niet gestoord wordt (foto 2).



## Zo LOOPT het op rolletjes.

Met de praktische 2 x 2 – centrale wielvergrendeling kunnen de wielen aan het hoofd- en voeteneinde afzonderlijk vergrendeld en losgezet worden. Vier dubbele wielen met kogellager maken dankzij de 360 graden draaibaarheid een gemakkelijke verplaatsing vanuit stilstand in iedere richting en in iedere positie van het ligvlak mogelijk (afbeelding links).

24V voedingskabel makkelijk te ontkoppelen



Bij behoefte is een externe accu mogelijk




24V wandtransformator direct aan het stopcontact

Draadloos



1. Zonder stekker

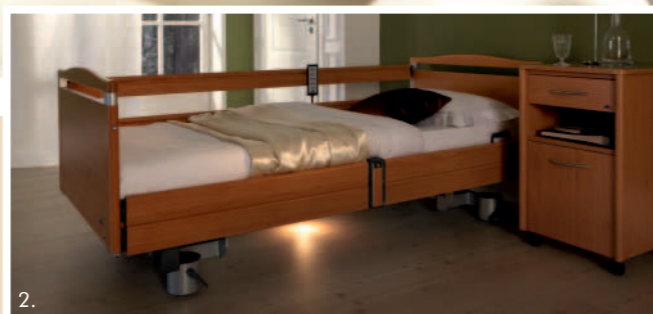

2.

Kort en compact.  
De voordelen in een **OVERZICHT.**

Ons 24V-systeem\* is een innovatie, die tal van **VOORDELEN** met zich meebrengt. Voor de bewoner of patiënt, voor de zorgverleners en zelfs voor de financiën.

- **Lagere stroomkosten** door een verminderd standby verbruik van slechts 0,5 watt.
- Een nog hogere veiligheid voor bewoners: **geen 230V toevoer** direct aan het bed
- **Geen electrosmog** door 230 V aan het bed.

# Kleuren

## AANGENAAM en BEHAAGLIJK

Vooraf door de inzet van verschillende kleuren wordt er een bepaalde sfeer gecreëerd. Om zoveel mogelijk op verschillende woonomgevingen in te kunnen spelen, hebben we een groot aantal duurzame decoren samengesteld. De uit massief hout geproduceerde elementen worden passend bij de decoren gebeitst. Vanzelfsprekend adviseren wij u graag bij uw keuze.

Onderstelkleur  
Siena

Onderstelkleur  
Argentum

# Vormen

## Ons rijk gevarieerde programma aan HOUTEN HOOFDVARIANTEN.

Negen verschillende hoofdvarianten staan er voor de verpleegbeddenserie Elvido-Vervo ter beschikking. De hoogwaardige houten

Elvido-ombouw overtuigt door haar design en haar individuele lijnvoering. Desgewenst zijn de hoofd- en voetborden naar keuze met elkaar combineerbaar.

Koningsesdoorn  
R5184 VV

Alero



Combino



Prinzino




Havanna  
R5681 VV

Kers edel  
R5360 VV

Podego



Pilastro

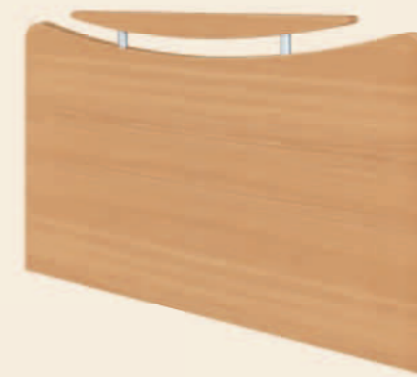

Comodo



Wilde peer cognac  
R5410 VV

Els goudrood  
R4601 VV

Solvo



Lito



Lito-Reha



Wilde peer natuur  
R5411 VV

Beuken natuur  
R5311 VV

Lindberg eiken  
R4223 VV

Bella noce chocola  
R4889 VV

# Technische gegevens

## AFMETINGEN en GEWICHTEN

Buitenmaat:	ca. 998 x 2120 mm (afhankelijk van de houten ombouw)
Ligvlak:	900 x 2000 mm of 1000 x 2000 mm (matrasafmeting)
Ligvlakverdeling (RS/zitdeel/boven-/onderbeensteun):	ca. 850/150/400/600 mm
Teruglopende rugsteun:	ca. 100 mm
Veilige werklust:	225 kg
Maximaal hefvermogen:	250 kg
Bodemvrijheid:	ca. 150 mm
Totaal gewicht:	ca. 140 kg

## VERSTELMOGELIJKHEDEN

Trendelenburg:	uitsluitend in speciale uitvoering ca. 14°
Anti-trendelenburg:	ca. 14°
Ligvlakhoogte (standaard hygiëne-ligvlak):	ca. 250-800 mm
Hoogteverstelling:	ca. 35 sec. (motorisch)
Verstelling rugsteun:	tot ca. 70°
Verstelling bovenbeensteun:	tot ca. 40°
Gestreekte beenpositie:	tot ca. 10°

## LIGVLAK

- Standaard hygiëne-ligvlak (polypropyleen)
- Comfort-ligvlak met verende elementen
- Bedverlenging geïntegreerd

## ZIJHEKKENCONCEPT (opties)

- Zonder zijhekken
- Separate zijhekken voor aanbrengen achteraf
- Geïntegreerde doorlopende zijhekken
- Gecombineerde zijsteunen incl. middensteun Mobivit

## STANDAARDUITVOERING ELVIDO-VERVO

- 4-zuilen design
- 4-delig ligvlak, elektrisch verstelbaar
- Ligvlak met anthropometrisch optimale afmetingen (85/15/40/60 cm)
- Hygiëne-ligvlak, uitneembaar
- Dubbele wielen ø 50 mm, wielbreedte 40 mm
- Te allen tijde vrijschakelbare wielen, rembaar per as
- Hoogteverstelling: ca. 25-80 cm
- Rugsteunverstelling tot 70°
- Bovenbeensteunverstelling tot 40°
- Anti-trendelenburg tot 14°
- Handbediening met selectieve blokkeerfunctie
- Doorlopende zijhekken met beschermhoogte 38 cm
- Houten ombouw naar keuze
- Houtkleuren naar keuze
- Coating metaaldelen naar keuze
- Autocontourverstelling
- 2 houders aan hoofdeinde voor bedgalg/infuusstandaard
- OpenBus-techniek

## EXTRA UITVOERING

- Geïntegreerde bedverlenging met telescopische zijhekbalken en zijpanelen
- Dekendrager
- Houten ombouw gebeitst in afwijkende kleur
- 24 volt aandrijvingsconcept met externe trafo
- Bedieningsunit met zwenking aan hoofdeinde
- Comfort-ligvlak
- Doorlopende zijhekken met 3 balken (beschermde hoogte tot 46 cm)
- Horizontale stootwielen
- Universele stootwielen, horizontaal en verticaal werkend
- Verzorgingsrail voor universele houders aan beide kanten

## ACCESSOIRES

- Leeslamp, halogeen- of LED-lamp
- Beschermhoezen van schuimleer (voor zijhekken)
- Opvangmatten
- Infuusstandaard/-houder
- Opzetstukken
- Diverse matrassen
- Dienblad
- Zijhek voor bedverlenging
- Kunststof adapter en opvulstuk voor bedverlenging
- Wandafstandhouder
- Infrarood-afstandsbediening
- Onderbedverlichting
- Geïntegreerde lampaansluitingen

# Uitvoeringen

	Uitvoering	Elvido-Vervo
Aandrijvingen	Volledig gemotoriseerde OpenBus-techniek	●
	Volledig mechanisch	-
	24 V (externe transformator)	○
Elektro-componenten	Handbediening, selectief blokkeerbaar	●
	Bedieningsunit voor zwenking aan hoofdeinde (Trendelenburg)	○
Zijheksystemen	Geïntegreerde doorlopende zijhekken	●
	Geïntegreerde gecombineerde zijhekken	○
	Doorlopende zijhekken achteraf aan te brengen	○
	Zijpaneel zonder zijhekken	○
Ligvlakken	Hygiëne-ligvlak	●
	Comfort-ligvlak	○
	Stalen ligvlak	○
	Ligvlak 4-delig	●
	Ligvlak in anti-trendelenburg zwenkbaar	●
	Ligvlak in trendelenburg zwenkbaar	○
Wielen	2 x 2 - centrale wielvergrendeling	●
Stootwielen	Horizontaal werkend	○
	Horizontaal en verticaal werkend	○
	Wandafstandhouder	○
Overige	Geschikt voor tilliften	●
	Houders aan hoofdeinde	●
	Houders aan voeteneinde	○
	Bedverlenging aanschroefbaar	-
	Bedverlenging geïntegreerd	●
	Bedverlenging met telescopische zijhekken	○
	In paneel geïntegreerde verzorgingsrail	○
Dekendrager	○	

- = Standaard
- = Optioneel leverbaar
- = Niet leverbaar

**Elvido – de veiligheidsstandaards\*\***  
**EN 14971**  
**EN 60601-1**  
**EN 60601-1-1**  
**DIN EN 60601-2-52**

Risicoanalyse voor medische producten  
 Veiligheid voor medische elektrische apparatuur  
 Elektromagnetische compatibiliteit  
 Medische elektrische apparatuur

Stand: Februari 2011

\* uitsluitend met hoofdeinde Alero, speciale uitvoering,  
 \*\* veiligheidsaanbeveling van het Duitse Federaal Instituut voor Farmaceutica en Medische Producten ("BfArM")



Deze folder werd volledig op FSC®-papier (Forest Stewardship Council®) gedrukt met ecologische inkt en lak. Het gebruikte materiaal is afkomstig van verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.

**Stieglmeyer BV**

Poppenbouwing 7, 4191 NZ Geldermalsen, Nederland

Telefoon: +31 (0) 345/58 18 81

Telefax: +31 (0) 345/58 18 92

E-mail: [info@stieglmeyer.nl](mailto:info@stieglmeyer.nl)

[www.stieglmeyer.nl](http://www.stieglmeyer.nl)

