

De INNOVATIE in het ziekenhuis



Clinic producten

| Pagina

Het moderne ziekenhuis heeft sterke partners nodig die producten met vele gebruiksvoordelen bieden. Stiegemeyer, een van de vooraanstaande systeemaanbieders, beantwoordt met innovatieve producten aan de verwachtingen en wensen van zijn klanten en hun patiënten. Het WELLCARE-concept van Stiegemeyer is maatstaf voor producten, waarmee de patiënt op zijn best voelt. WELLCARE is de optimale balans tussen medische zorg, ergonomie en esthetica. Nieuwe productseries, zoals het modulaire ziekenhuisbed Seta of de patiëntstretcher Mobilo, bieden echte voordelen.

De **PATIËNT** staat centraal



Seta



Laten we het **SAMEN** doen

6-13

Avanta



Nieuw design voor een snelle **GENEZING**

14-19

Vitano



Optimale **INNOVATIE**

20-25

Vivendo



De **MAATSTAF** voor efficiëntie

26-31

Sicuro



OPTIMAAL voor intensieve verpleging

32-37

Mobilo



Flexibel **LIGSYSTEEM** voor patiënten voor een dag

38-39

Vitano



Een nachtkast vol **IDEEËN**

40-41

Stabilo



Tijdloos **BETROUWBAAR**

42-43

Maximo/Minimo



WELZIJN voor de kleintjes

44-45

Lettino/Carino



IDEAAL voor de eerste uren samen

46-47

Ravello



MOBIEL met veiligheid en comfort

48-49

Ligsystemen



De vooruitgang van **COMFORT**

50-51

Toebehoren



Praktische **EXTRA'S** ter keuze

52-55

Kleurenoverzicht




56-59

Technische parameters

60-63

WELZIJN als systeem

Ziekenhuizen en zorginstellingen die modern willen blijven, moeten efficiënt plannen en zich gelijktijdig op het welzijn van de patiënten concentreren. Doel van de WELLCARE-gedachte is ziekenhuizen dusdanig te ondersteunen dat de efficiency wordt verhoogd. Hiervan profiteert zowel de patiënt als het ziekenhuis.

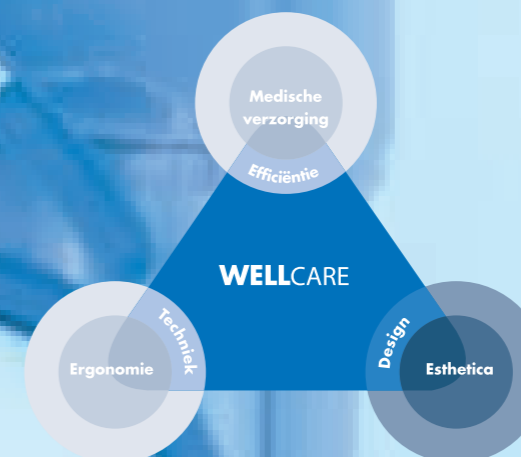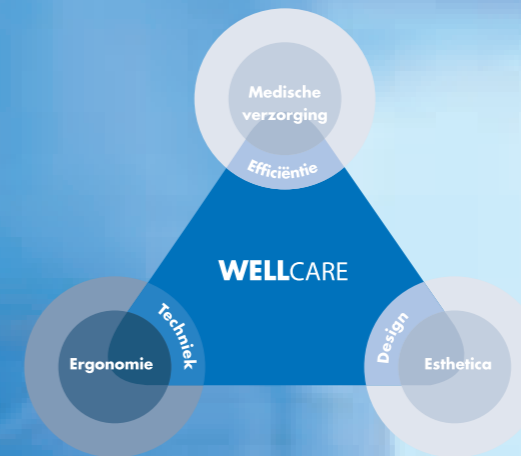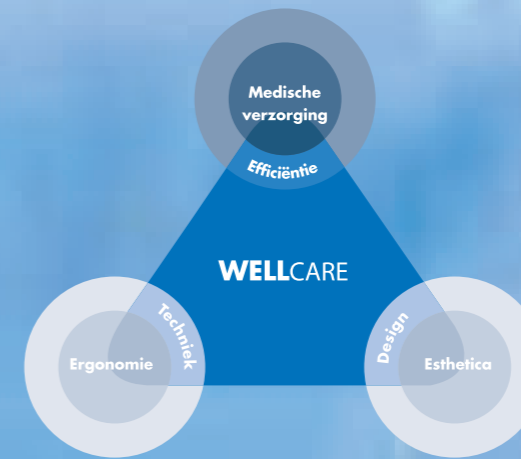

Concentratie op het WEZENLIJKE



Juist de hulpbehoevende patiënt verdient de meeste aandacht en de beste kwaliteit in de verzorging: Alleen het beste ligstelsel zal ook steeds aan de medische eisen voldoen.

DYNAMISCH tot in het detail



In het dagelijks leven van een ziekenhuis moet blijken, hoe goed en modern een ligstelsel is: van handling, hygiëne management tot aan het onderhoud kunnen alle processen worden geoptimaliseerd.

Ruimte voor de MENS




Bij de keuze voor het beste ligstelsel spelen zachte factoren de beslissende rol: esthetica, comfort en ambiance – zodat patiënten, medewerkers en bezoekers zich op hun best voelen.

U zoekt een ziekenhuisbed dat aan uw eisen voldoet waarbij er rekening wordt gehouden met uw budget? Wees dan creatief met Seta: stel met behulp van ons innovatieve modulaire systeem een product samen dat perfect bij u past.

Seta biedt u een groot aantal modelvarianten aan waarbij de keuze niet beperkt blijft tot enkel de kleurkeuze. De verschillende componenten van Seta overtuigen dankzij de uitgekende technische details en het duidelijk herkenbare design. Ontdek de verscheidenheid.



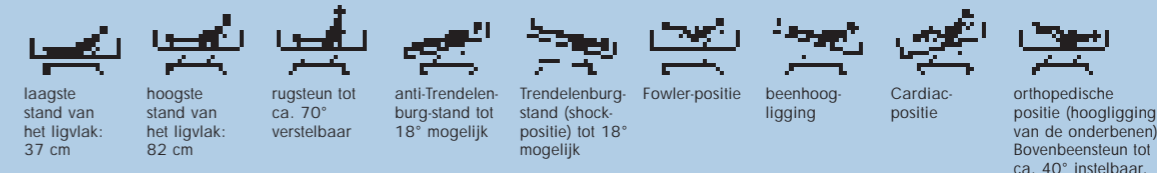

Van top tot teen.
 Passend bij de gekozen zijhekken bieden wij snel en eenvoudig afneembare hoofd- en voeteneindborden in een duidelijk herkenbaar design.

Variabel comfort.
 Naar keuze worden er drie verschillende soorten ligvlakken aangeboden. Het comfort-ligvlak biedt een echte vering voor meer welzijn.

Doorlopend veilig.
 De doorlopende variant van de zijhekken zorgt voor optimale bescherming van uw patiënten.

Aangename rugligging.
 Wat de Duitse beroepsorganisatie DbfK adviseert, is voor ons standaard. De lengteverstelling van de rugsteun van 100 mm bevordert een ontspannen zithouding. Het is bij Seta uiteraard mogelijk de rugsteun aan beide zijkanten automatisch te laten zakken.

Ron dom bescherming.
 De gepatenteerde stootwielen in horizontale en verticale richting beschermen uw wanden.



Handig gedaan.
 De dekendrager vergemakkelijkt de dagelijkse verzorging en biedt plaats voor de bedieningsunit.


Lang niet te kort.
 Ook de lange patiënt komt niet te kort. Het bed en de onderbeensteun kunnen naar behoefte langer gemaakt worden.

Lager dan andere.
 Dankzij de verstelmogelijkheid van 37 cm tot 82 cm wordt het uit bed komen en de verzorging van de patiënt vereenvoudigd.

Eenvoudig in onderhoud.
 Door de centrale plaatsing van de aandrijvingen onder het ligvlak wordt een wirwar van kabels voorkomen en wordt bij de reiniging tijd bespaard.

Makkelijk rijden.
 Met de korte wielstand en de 150 mm soepel lopende wielen kunt u beter rijden.

Optimaal verzorgd.
 De vier houders aan het hoofd- en voeteneinde voor de papegaai of de infuusstandaard zorgen ervoor dat de patiënt van alle kanten optimaal kan worden verzorgd. De in het zijpaneel geïntegreerde verzorgingsrail verschaft over een lengte van 200 cm heel veel ruimte voor uw accessoires.

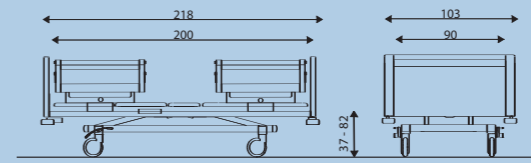

EFFICIËNTIE van de zorg

In de moderne alledaagse ziekenhuispraktijk zijn het juist de details die grote uitwerkingen hebben op het welzijn van de patiënt en het verplegend personeel.



Comfort-ligvlak. Bijzonder aangenaam – met een optimaal ligcomfort – door het fijn gestructureerde en verende ligvlak. Het gladde oppervlak kan heel goed gereinigd worden.*



Lamellen-ligvlak. Het lamellen-ligvlak kan uitstekend in wasinstallaties gereinigd worden omdat het heel snel opdroogt.*



Kunststof-ligvlak. Ook in de standaardversie kan het ligvlak bijzonder eenvoudig en snel gereinigd worden. Het geringe gewicht vergemakkelijkt het onderhoud.



Laag ligvlak. De unieke laagste stand van 37 cm optimaliseert de valpreventie.




Verlicht. De onderbedverlichting dient voor een veilige oriëntatie in de nacht en voorkomt het risico van vallen. Het licht is zo zacht dat de buurman niet wordt gestoord.

TECHNIEK die meer presteert

Seta voldoet aan uw wensen en zorgt met de nuttige technische componenten voor een soepel verloop van uw werkzaamheden. Een investering voor de toekomst.



Flexibele steun. De geïntegreerde gedeelde zijhekken kunnen als hulp bij het mobiliseren gebruikt worden. In de 2e stand bieden ze al bescherming van 380 mm.

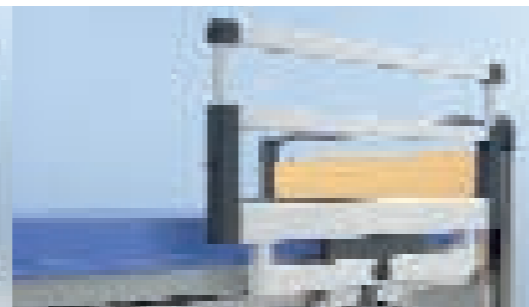

Ver in de hoogte. Dankzij de telescopisch uitschuifbare zijsteun die tot 440 mm boven het ligvlak uitkomt, kunnen anti-decubitus matrassen op een correcte wijze gebruikt worden. Na gebruik plaatsbesparend onder het bed wegklapbaar.



Gecombineerde bescherming. De gecombineerde zijhekken kunnen aan hoofd- en voeteneinde omhoog worden geplaatst. Flexibel als complete bescherming of met veel bewegingsruimte aan het voeteneinde.



Mobiel. De stabiele middenstijl dient als veilige mobilisatiehulp of kan ruimtebesparend aan het bed worden geplaatst. Hij is ook apart beschikbaar.




Doorlopend veilig. Geïntegreerde doorlopende zijhekken die voldoen aan de adviezen van het Duitse BfArM bij fixeren. Ze zijn bijzonder stil en bieden 380 mm resp. 420 mm bescherming.

DESIGN voor het welzijn

Seta is het passende antwoord op de eisen die u en uw patiënten stellen. De harmonische vormen spreken een duidelijke taal en helpen daarnaast bij het genezingsproces.




Minder is meer. Ook bij het design hebben wij geen compromissen gesloten. Duidelijke lijnen, geraffineerde details en waardevolle materialen maken van de Seta een eerste klas ziekenhuisbed.

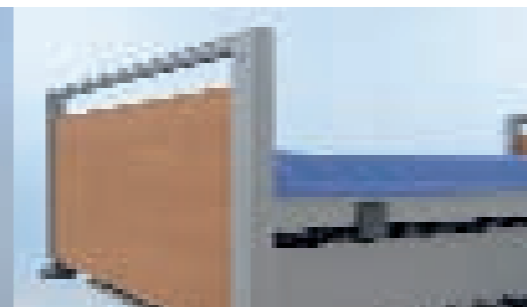

Hoofd- en voeteneindborden naar keuze (Seta Base en Seta Flex). Seta Base (li) biedt de integratie van doorlopende zijhekken of gedeelde zijhekken. Seta Flex (re) kan met geïntegreerde, gedeelde zijhekken en daarnaast met separate, doorlopende zijhekken uitgerust worden. Uiteraard bestaan beide varianten ook zonder zijhekken. Alle modellen bieden een ruime keuze aan kleuren en dessins die individueel samengesteld kunnen worden.




Afgedekt. De zijpanelen bedekken het bedframe en integreren de verzorgingsrail over de gehele bedlengte van 200 cm.**

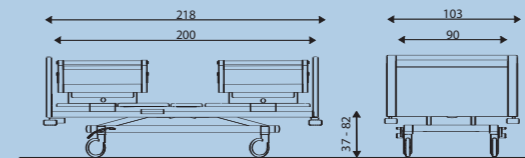

EFFICIËNTIE van de zorg

In de moderne alledaagse ziekenhuispraktijk zijn het juist de details die grote uitwerkingen hebben op het welzijn van de patiënt en het verplegend personeel.

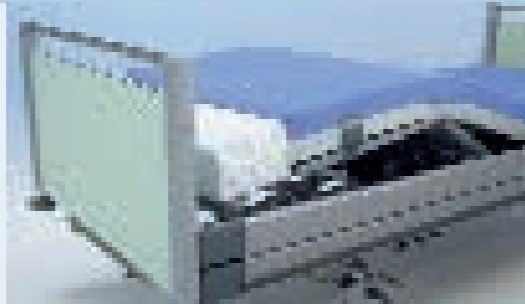

Variabele bedverlenging. Ook lange patiënten krijgen voldoende beenvrijheid want zowel het bed alsook de onderbeensteun kunnen optioneel verlengd worden.*



Goed verzorgd. De onder de rugsteun geïntegreerde verzorgingsrail* waarborgt dat de toebehoren zich steeds binnen handbereik van de patiënt bevinden.



Stabiel. Door het teruglopen van de rugsteun tot 100 mm wordt het wegglijden voorkomen.

Noodschakeling. Veilig laten zakken van de rugsteun aan beide kanten van het bed mogelijk.



Omvangrijk. Geïntegreerde houders voor de papegaai of infuusstandaard in alle vier de hoeken.



Vederlicht. Geen geïmproviseer meer bij het bed verschonen: de praktische dekdrager verhoogt de hygiëne.

TECHNIEK die meer presteert

Seta voldoet aan uw wensen en zorgt met de nuttige technische componenten voor een soepel verloop van uw werkzaamheden. Een investering voor de toekomst.



Variabel. Seta is met verschillende aandrijvingsmodellen leverbaar. Van de geheel motorische uitvoering voor hoog bediencomfort, gedeeltelijk motorisch tot aan volledig mechanisch.




Blokkeerfunctie. Via de standaard blokkeerunit kunnen vele functies overzichtelijk worden geregeld en geblokkeerd. Het comfortabele bedieningspaneel* biedt talrijke extra functies (CPR, programmering enz.).



Hoogteverstelling. Flexibeler gaat het niet. Met de uitgebreide verstelmogelijkheid van 37 cm tot 82 cm heeft het bed altijd een aangename hoogte tijdens het transporteren, mobiliseren of verzorgen van de patiënt.




Vrijheid bij hoofdeinde. Door de hoofdborden snel en eenvoudig te verwijderen, wordt de vrije toegang tot de patiënt mogelijk gemaakt. Ook geschikt als reanimatiehulp.

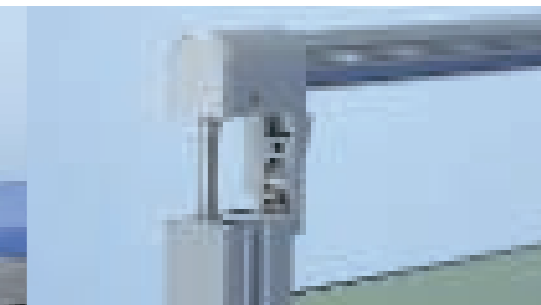

Snel losgemaakt. Via een praktische knipsluiting kunnen de beugels veilig vastgemaakt, maar ook weer snel losgemaakt worden.

DESIGN voor het welzijn

Seta is het passende antwoord op de eisen die u en uw patiënten stellen. De harmonische vormen spreken een duidelijke taal en helpen daarnaast bij het genezingsproces.

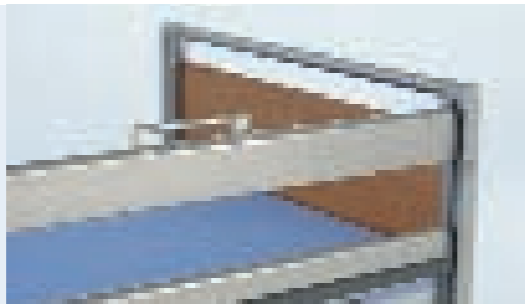

Praktisch. Dankzij een praktische greep, passend bij het design, kunnen de doorlopende zijhekkens eenvoudig en snel bediend worden.*




Vaste steun. De intelligent vormgegeven matrashouders geven steun en voorkomen door hun flexibele inzetbaarheid dat vingers zich kunnen vastklemmen. Bovendien wordt een veilig bedienen van de rugsteun mogelijk gemaakt.



Opgeruimd. Leidingen, kabels en motoren werden centraal onder het ligvlak geplaatst. Eenvoudig te reinigen.




Goed in zijn spoor blijvend. Centraal te remmen 150 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen van het bed. Zowel op rechte stukken alsook in de bochten blijven ze altijd in het spoor.

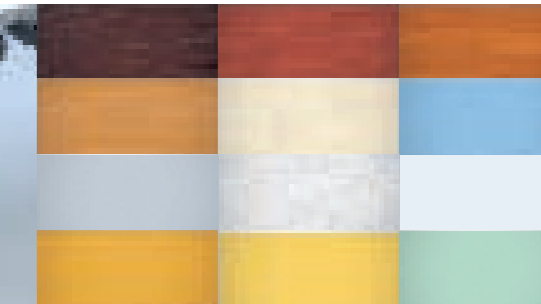

Kleurvariëteit. De ruime keuze aan kleuren en dessins ondersteunt de perfecte integratie van het bed in het designconcept van uw huis. Meer kleuren op aanvraag.**

De intensieve uitwisseling van ervaringen met deskundigen maakt het ziekenhuisbed Avanta tot een voorloper voor belangrijke technische oplossingen. Hierbij werd een gedegen techniek met elegant, aangenaam design gecombineerd. Met een duidelijke vorm en met vele kleurcombinaties brengt Avanta nieuwe elegantie in het ziekenhuis.



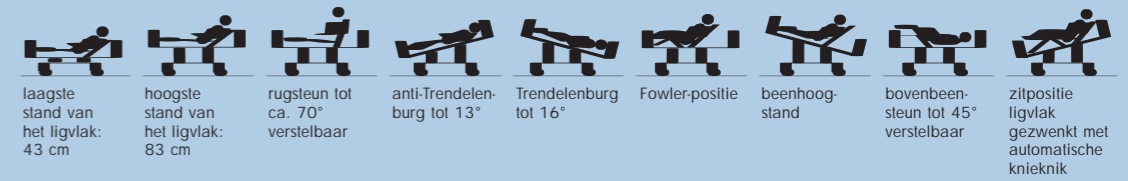

Veilige zijkanten.
Avanta is met gedeelde zijhekken, zonder zijhekken alsook met doorlopende zijhekken met drie balken leverbaar. Hiermee beantwoordt Avanta aan het BfArM-advies voor de fixatie van patiënten.

Hoogste comfort.
Vele verstelmogelijkheden van het ligvlak – tot aan de buitengewoon comfortabele zitpositie met automatische knieknik – ondersteund door de teruglopende rugsteun.

Eenvoudig bedden opmaken.
Dekendrager.

Snelle toegang tot de patiënt.
Uitneembaar hoofd- en voeteneindbord.




Effectief behoedzaam.
De stootwielen aan het hoofdeinde werken in verticale en horizontale richting als bescherming van wanden en bedden (optioneel ook aan het voeteneinde).

Heel eenvoudige reiniging.
Gladde vlakken en afneembare ABS-kunststof-ligvlakdelen. Avanta is op wens ook in een uitvoering voor machinale reiniging verkrijgbaar.


Eenvoudig verplaatsen.
Diagonaal geplaatste automatisch schakelende rijrichtingswielen.

Vaste stand.
Twee elegante kolommen verenigen moderne vormgeving en een hoog verstelbereik met optimale stabiliteit.

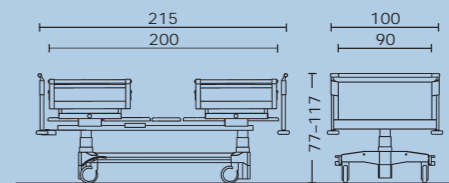

EFFICIËNTIE van de zorg

Hoogste kwaliteit in de verzorging van de patiënt. Het functioneel design van Avanta helpt het ziekenhuispersoneel bij het dagelijkse werk.

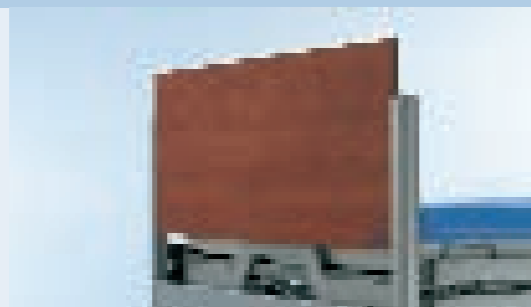

Flexibel. Afneembare hoofd- en voeteneindborden vereenvoudigen de verzorging van de patiënt en kunnen als reanimatiehulp worden ingezet.



Voor ieder gebruik geschikt. De gedeelde zijhekken zijn een ideale mobilisatiehulp. Afzonderlijk kunnen ze onder het ligvlak worden gezwenkt en zijn voor een verhoogd ligstelsel tot 44 cm uitschuifbaar.



Uniek. De doorlopende, omlaag te brengen zijhekken zijn in de hoofd- en voeteneindborden geïntegreerd. Hun gebruik vervult bij de fixatie de adviesrichtlijnen van de BfArM.



Praktisch. Aan weerszijden aangebrachte multifunctionele houders voor een snel en gemakkelijk aanbrengen van verzorgingselementen.



Hygiënisch. De afneembare vierdelige ABS-kunststof-ligvlakdelen zijn eenvoudig te reinigen en vereenvoudigt de toegang tot de elektromotorische aandrijvingscomponenten.

TECHNIEK die meer presteert

Een bijzonder pluspunt van Avanta is de veelzijdige instelmogelijkheid. De elektromotorische verstelling bespoedigt werkprocessen en verhoogt het comfort. Gelijktijdig garandeert Avanta een maximum aan stabiliteit en zekerheid.



Onafhankelijk. Via elektromotorische verstelmogelijkheden kan de patiënt zelfstandig per handset de ligvlakken van het bed in de meest comfortabele positie brengen.



Controleerbaar. Het geïntegreerde bedieningspaneel waarborgt een eenvoudig bedienen van het bed.*


Veilig. Blokkeerunit voor de selectieve vergrendeling van de elektromotorische verstelfuncties.



Mobiel. Op mooie integrale wielen met automatische rijrichting laat Avanta zich optimaal verplaatsen. Centrale vergrendeling van de wielen met optimaal te bereiken rempedaal.




Toonaangevend. De bedverlenging met geïntegreerde onderbeensteunverlenging verzekert ook in uitgeschoven toestand de volle werking van het ligvlak.

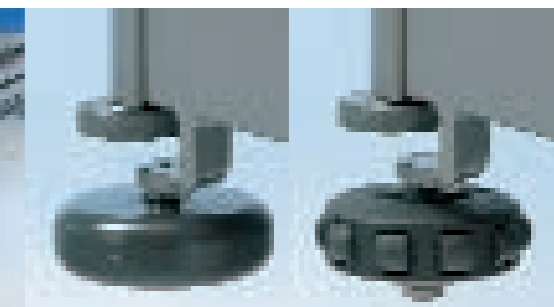

Beschermd. De stootwielen. Aan het hoofdeinde ook verticaal werkend, beschermen zowel de wanden als het bed.

DESIGN voor het welzijn

Welzijn is een effectieve succesfactor bij het genezingsproces. Avanta verbindt techniek en design tot een eigen, moderne stijl. Een duidelijke vormgeving is het zichtbare handelsmerk van Avanta.

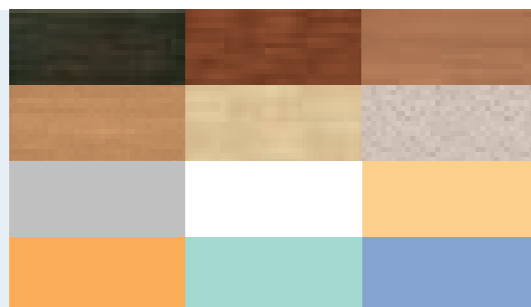


Kleurrijk. Naar keuze is er een aantrekkelijke verscheidenheid aan kleuren bij hoofd- en voeteneindborden in combinatie met de framekleuren van de bedden in argenteum en kristalwit.**



Individueel. Fraaie vormgeving – eenvoudige reiniging. Grote, gladde vlakken en ruim kleurensortiment vormen het design van de hoofdborden van de Avanta Plus.



Modern. Avanta classic in strak design. Naar keuze met gedeelde zijhekken of met separate doorlopende zijhekken of ook zonder zijhekken.

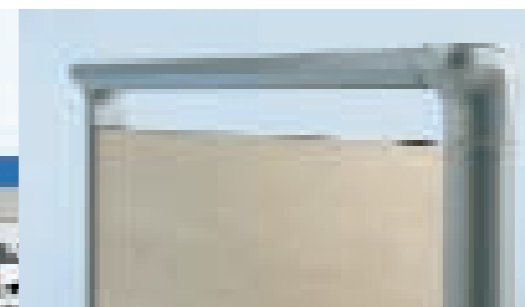


Handzaam. Design tot in de details. Het hoofd- en voeteneindbord van de Avanta is naast de ergonomisch gevormde greeplijst ook met ronde buizen uit roestvrij staal leverbaar.



Personeelsvriendelijk. Functioneel design. Grote bodemvrijheid en gladde vlakken verminderen de inspanning tijdens het reinigen.

Een bed met de meest moderne techniek, bijzonder fraai verpakt. Omdat bij Vitano de uitwendig zichtbare techniek tot een minimum werd gereduceerd, ontstonden nieuwe mogelijkheden voor sierlijke vormen. Vitano staat voor een geheel nieuw ziekenhuisoptreden – met lichtheid en elegantie, met charme en karakter.



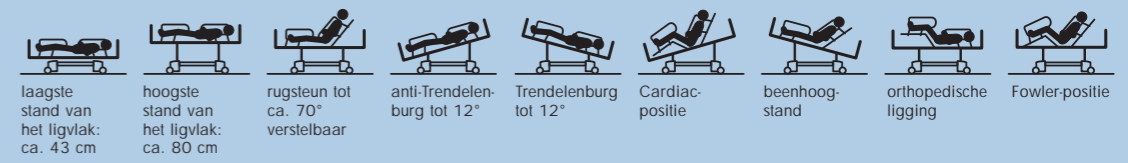

laagste stand van het ligvlak: ca. 43 cm

hoogste stand van het ligvlak: ca. 80 cm

rugsteun tot ca. 70° verstelbaar

anti-Trendelenburg tot 12°

Trendelenburg tot 12°

Cardiacpositie

beenhoogstand

orthopedische ligging

Fowler-positie

Heel eenvoudige reiniging. Vitano is principieel voor de machinale reiniging geschikt. Het uit vier delen bestaande ligvlak met gladde verwijderbare ABS-kunststofdelen is eenvoudig te reinigen.*

Opvallende zijkant. Typisch voor Vitano: de afgeronde geïntegreerde zijhekken met één hand snel en veilig te bedienen.

Geregeld comfort. De in de zijhekken geïntegreerde bedienelementen aan het hoofdeinde regelen de belangrijkste verstelfuncties.




Eenvoudig opmaken van de bedden. Geïntegreerde dekendrager.

Zonder hoeken en kanten. Het onderstel met afgeronde ABS-kunststofafdekking vereenvoudigt de reiniging.

Verhogende functie. Via vier telescopische stijlen uit roestvrij staal kan de bedhoogte individueel versteld worden.

Eenvoudig verplaatsen. Goed bestuurbare wielen dankzij geringe wielbasis.

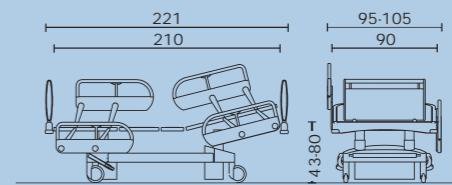

EFFICIËNTIE van de zorg

Bij de constructie van Vitano werden de eisen van het dagelijks leven in een ziekenhuis geheel in acht genomen. Met beproefde uitvoeringskenmerken en innovatieve details vereenvoudigt Vitano de werkprocessen in het dagelijkse ziekenhuisleven.



Hygiënisch. De afneembare driedelige ABS-kunststof-ligvlakdelen zijn eenvoudig te reinigen en vereenvoudigt de toegang tot de elektromotorische aandrijvingscomponenten.*



Stabiel. Veilige lig- en zitpositie. Uit te schuiven rug- en bovenbeensteun volgens DBfK-advies is comfortabel en reduceert het aantal verplaatsingen.



Onafhankelijk. Met de in de zijhekkken geïntegreerde bedienelementen kan het ligvlak gemakkelijk versteld worden. Aan de buitenkant door het ziekenhuispersoneel, aan de binnenkant door patiënten.




Zelfstandig. Vier geïntegreerde zijhekkken geven steun. Nieuwe openhartigheid bij het design en met de mogelijkheid, ze met kleine moeite zelfstandig omlaag te zwenken.



Tijdbesparend. De standaard geïntegreerde dekendrager helpt het personeel bij de verzorging van de patiënten.

TECHNIEK die meer presteert

Vitano overtuigt met zijn elektromotorische instelmogelijkheden. Zijn techniek garandeert een maximum aan stabiliteit en veiligheid.

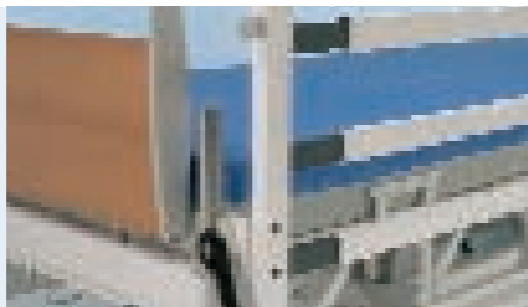

Beschermd. Adapter voor het aanbrengen van doorlopende zijhekkken. Beschermt de patiënten tegen vallen en maakt het gebruik van fixatiesystemen mogelijk (BfArM-advies).*



Controleerbaar. Het standaard in de dekendrager geïntegreerde en afneembare bedieningspaneel waarborgt een eenvoudige bediening van de verstelfuncties door het ziekenhuispersoneel.



Verheffend. Vier robuuste telescopische stijlen uit roestvrij staal regelen de bedhoogte door een druk op de knop en zorgen voor een veilige stand.




Praktisch. Aan weerszijden aangebrachte multifunctionele houders voor een snel en gemakkelijk aanbrengen van accessoires.



Stevig. Aan het voeteneinde kunnen de wielen centraal geremd worden.

DESIGN voor het welzijn

Welzijn is een effectieve succesfactor bij het genezingsproces. Vitano biedt een design dat een sterke techniek door een nieuwe vormgeving harmonisch met de ziekenhuiswereld verbindt.

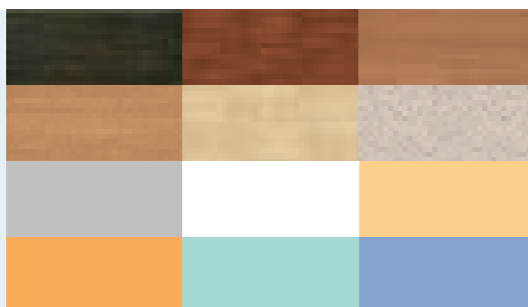

Kleurrijk. Voor de onderstelafdekking, de zijhekkken en de hoofdborden staat een aantrekkelijke verscheidenheid aan kleuren ter keuze. Gecombineerd met de Vitano grondkleur kristalwit.**




Individueel. De Vitano-hoofd- en voeteneindborden. Fraaie vormgeving – kinesthetisch gevormd – eenvoudige reiniging. Voor een betere verzorging van patiënten uitneembaar.



Veelzijdig. Vitano kan ook met het design van de hoofd- en voeteneindborden van de Valero gecombineerd worden. Twaalf kleurvarianties bieden een grote mogelijkheid bij de vormgeving.*





Opggeruimd. Het onderstel met afgeronde ABS-kunststofafdekking beschermt tegen verontreiniging en vereenvoudigt de reiniging.

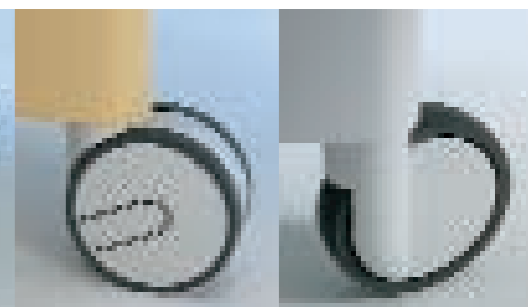

Flexibel. Gemakkelijk, rustig verplaatsen op licht lopende 150 mm wielen.

Comfort en welzijn zijn belangrijk voor de genezing. Stiegemeyer zet maatstaven met een ziekenhuisbed dat patiënten en personeel overtuigende kwaliteiten biedt: Vivendo – een beddenprogramma dat aan alle eisen voldoet. Modulaire opbouw en een breed assortiment aan uitvoeringsmogelijkheden maken Vivendo tot een perfecte begeleider. Efficiency en design – zo overtuigt Vivendo.



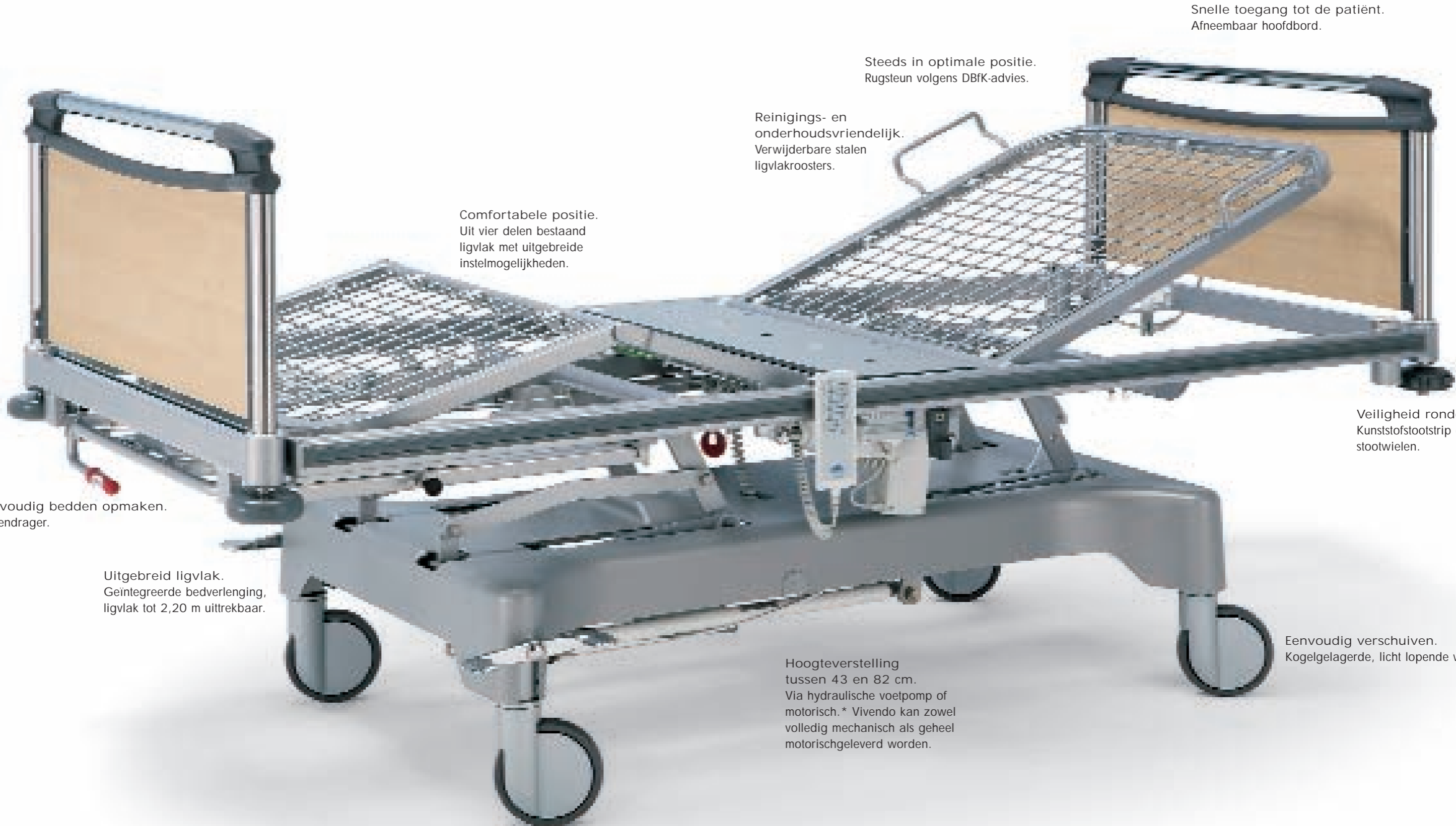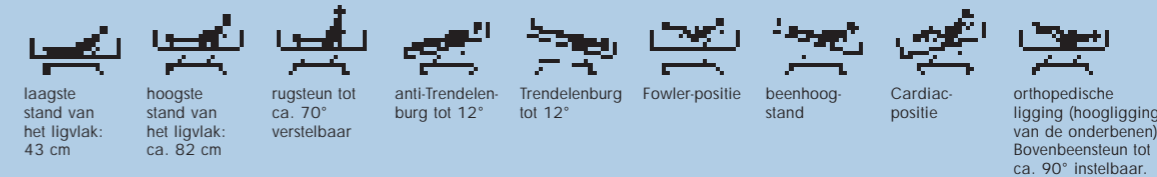

Snelle toegang tot de patiënt.
Afnembaar hoofdbord.

Steeds in optimale positie.
Rugsteun volgens DBfK-advies.

Reinigings- en
onderhoudsvriendelijk.
Verwijderbare stalen
ligvlakroosters.

Comfortabele positie.
Uit vier delen bestaand
ligvlak met uitgebreide
instelmogelijkheden.


Veiligheid rondom.
Kunststofstootstrip en
stootwielen.

Eenvoudig bedden opmaken.
Dekendrager.

Uitgebreid ligvlak.
Geïntegreerde bedverlenging,
ligvlak tot 2,20 m uittrekbaar.

Hoogteverstelling
tussen 43 en 82 cm.
Via hydraulische voetpomp of
motorisch.* Vivendo kan zowel
volledig mechanisch als geheel
motorischgeleverd worden.

Eenvoudig verschuiven.
Kogelgelagerde, licht lopende wielen.

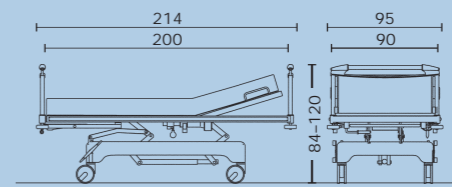

EFFICIËNTIE van de zorg

Hoogste kwaliteit in de verzorging van de patiënt – onder alle omstandigheden. Met beproefde uitvoeringskenmerken en innovatieve concepten verhoogt Vivendo de efficiëntie in de verzorging.



Toonaangevend. Geïntegreerde bedverlenging tot 20 cm.



Praktisch. Bij het opmaken van bedden – de dekendrager, een ideale bewaarplaats voor kussen en deken.



Hygiënisch. De afneembare driedelige ABS-kunststof-ligvlakafdelen zijn eenvoudig te reinigen en bespaart tijd.*



Stevig. Twee hulzen, binnen het ligvlak kader ten behoeve van inuusstandaard en papegaai.



Mobiel. Het bed-nachtkast-transport-systeem neemt het nachtkastje „op de rug“. Eenvoudig te bewegen, vereenvoudigt het transport.

TECHNIEK die meer presteert

Vivendo dat is techniek die werkprocessen versnelt. Techniek die een maximum aan stabiliteit en veiligheid garandeert. Techniek met een lange levensduur. Dat maakt Vivendo tot een duurzame investering.




Gepatenteerd. De in heel Europa gepatenteerde ontkoppeling van de Trendelenburg brengt de patiënt in een geval van nood meteen in een optimale shockpositie – ook zonder stroom en accu.



Veilig. De blokkeerunit maakt het selectief vergrendelen van alle elektromotorische verstelfuncties mogelijk. Gedurende het transport van patiënten een netonafhankelijke bediening met accu.*



Stabiel. Veilige lig- en zitpositie: teruglopende rugsteun volgens DBfK-advies. In noodgevallen kan de rugsteun aan beide kanten neergelaten worden.*

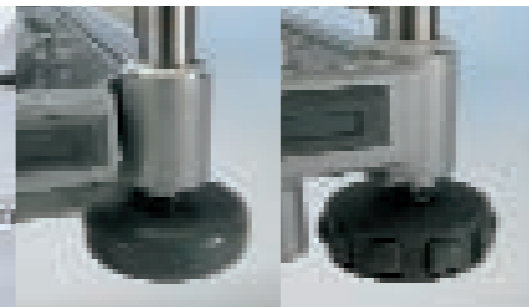


Beschermd. De stootwielen (optioneel ook verticaal werkend) en kunststofstootstrips vangen stoten op.



Onafhankelijk. Uitrusting met elektromotorische verstelmogelijkheden. Regeling van de belangrijkste bedfuncties per handschakelaar.*

DESIGN voor het welzijn

Welzijn is een zachte, maar effectieve succesfactor bij het genezingsproces. Vivendo onderscheidt zich door de optimale balans tussen medische verzorging, ergonomie en esthetica.

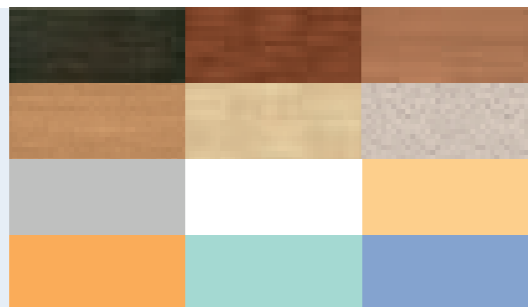

Harmonisch. Kristalwit of argenteum plus (zilver) – Vivendo is in twee grondkleuren verkrijgbaar. Te combineren met een breed kleurenassortiment voor de hoofd- en voeteneindborden.**



Opggeruimd. De afgeronde ABS-onderstelafdekking beschermt tegen vuil en is eenvoudig te reinigen.*




Functioneel. De afneembare hoofdborden maken een eenvoudige toegang tot patiënten mogelijk. Maak een keuze uit het Stiegemeyer-kleurenassortiment die aan uw eisen voldoet.



Flexibel. Gemakkelijk, rustig verplaatsen op licht lopende 150 mm wielen. Drie verschillende wielmodellen staan ter beschikking.*

Technische perfectie en een omvangrijke uitrusting, kenmerken Sicuro en Sicuro plus. Twee moderne bedden voor intensieve verpleging die aan de hoogste eisen beantwoorden. Bedden die de behandeling en genezing van de patiënten optimaal bevorderen.



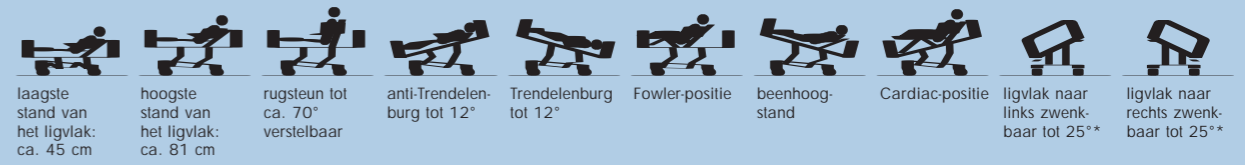

laagste stand van het ligvlak: ca. 45 cm
 hoogste stand van het ligvlak: ca. 81 cm
 rugsteun tot ca. 70° verstelbaar
 anti-Trendelenburg tot 12°
 Trendelenburg tot 12°
 Fowler-positie
 beenhoogstand
 Cardiac-positie
 ligvlak naar links zwenkbaar tot 25°*
 ligvlak naar rechts zwenkbaar tot 25°*

*alleen Sicuro plus

Ligvlakverstelling en zwenkmogelijkheid. In totaal vijf elektromotoren zorgen bij de Sicuro plus voor absoluut nauwkeurige beweeglijkheid.

Veilige zijkanten. Sicuro en Sicuro plus geeft het ook met drievoudige zijhekken uit roestvrij staal resp. met doorlopende zijhekken met drie of vier balken.*

Goed te doorzien. De rugsteun is in staat röntgen door te laten en voor veel klinisch-radiologisch relevant onderzoek geschikt.


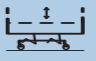



Eenvoudig toegrijpen. Afneembaar en wegklapbaar hoofdbord van Sicuro en Sicuro plus vereenvoudigt de verzorging van de patiënt en breidt het röntgen doorlatend bereik uit.


Eenvoudig opmaken van de bedden. Dekendrager.

Alles met in de gaten. Rug-, boven- en onderbeensteunen alsook ligvlakzwenking kunnen bij de Sicuro plus met de hand ingesteld worden.

Zonder hoeken en kanten. Het onderstel met afgeronde ABS-kunststofafdekking vereenvoudigt de reiniging.**

Elektrische verstelmogelijkheden	Sicuro	Sicuro plus
volledig elektrisch incl. Trendelenburg/anti-Trendelenburg en zijdelingse zwenking	—	●
rug-, bovenbeensteun en ligvlakhoogte elektrisch	○	—
rug- en ligvlakhoogte elektrisch	○	—
rugleuning elektrisch	○	—
volledig mechanisch	●	—

 Rugsteun	 Ligvlakhoogte	 Beenleuning	 Trendelenburg/anti-Trendelenburg	 Ligvlakzwenking	— niet leverbaar
					● standaard
					○ optioneel

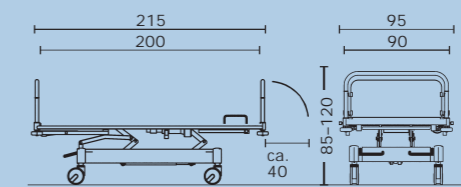

EFFICIËNTIE van de zorg

Hoogste kwaliteit in de verzorging van de patiënt. De intensive carebedden Sicuro en Sicuro plus steunen met beproefde uitvoeringskenmerken het verzorgingspersoneel met inachtneming van de geneeskundige eisen.



Behulpzaam. Het zijdelingse zwenkvermogen van Sicuro plus ter decubitusprofylaxe, verzachting van de pijn en ondersteuning bij het ademen.



Veelzijdig. Het uit vier delen bestaande ligvlak biedt vele nuttige verstelmogelijkheden. Bijvoorbeeld met 80° gebogen bovenbeensteun voor de orthopedische ligging.



Goed te doorzien. De rugsteun is in staat röntgen door te laten. In combinatie met het wegklapbare hoofdbord voor radiologisch onderzoek van de patiënt zonder verplaatsing.



Levensreddend. De wegklapbare steun onder het verlengde hoofdbord zorgt voor aanvullende stabiliteit bij reanimatie.



Onderhoudsvriendelijk. De afneembare stalen ligvlakroosters vereenvoudigen de toegang tot de aandrijvingscomponenten.



Hygiënisch. De afneembare boven- en onderbeensteunen uit ABS-kunststof zijn gemakkelijk te reinigen en vereenvoudigen de toegang tot de aandrijvingscomponenten.*



Praktisch. Standaard aan weerszijden aangebrachte verzorgingsrail uit roestvrij staal voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van accessoires.



Opgeruimd. Het onderstel met afgeronde ABS-kunststofafdekking beschermt tegen verontreiniging en vereenvoudigt de reiniging.*



Tijdbesparend. De standaard geïntegreerde dekendrager helpt het personeel bij de verzorging van de patiënten.



Eenvoudig te bereiken. Het afneembare hoofdbord vereenvoudigt de verzorging van de patiënt.

TECHNIEK die meer presteert

Sicuro plus overtuigt met uitgebreide elektromotorische verstelmogelijkheden. Maar al in de basisversie biedt Sicuro buitengewone eigenschappen en een maximum aan stabiliteit en zekerheid.



Controleerbaar. Bij de geheel motorische Sicuro plus-versie is het bedieningspaneel in de dekendrager voor het beddengoed geïntegreerd. Het paneel maakt een eenvoudig bedienen van de verstelfuncties mogelijk. De blokkeerunit van de Sicuro maakt het selectief vergrendelen van alle verstelfuncties mogelijk.



Mobiel. Stabiele dubbele wielen. Hun statisch geleidingsvermogen zorgt voor een zekere aarding van het compleet elektrisch geleidend bed bij onderzoek en bewaking.



Stabiel. Veilige lig- en zitpositie. Teruglopende rugsteun volgens DBfK-advies. Is comfortabel en reduceert het aantal verplaatsingen.




Toonaangevend. De standaard geïntegreerde bedverlenging voor lange patiënten.

Door verbeterde medische standaards en gewijzigde condities vindt de verzorging van de patiënten in toenemende mate ambulante plaats.

Voor vele patiënten is het verblijf in een ziekenhuis niet langer dan één dag.

Mobilo is ideaal voor de dagpatiënt. De stretcher maakt een veilig transport en optimale verzorging mogelijk, en biedt de patiënt comfort zonder verplaatst te hoeven worden.

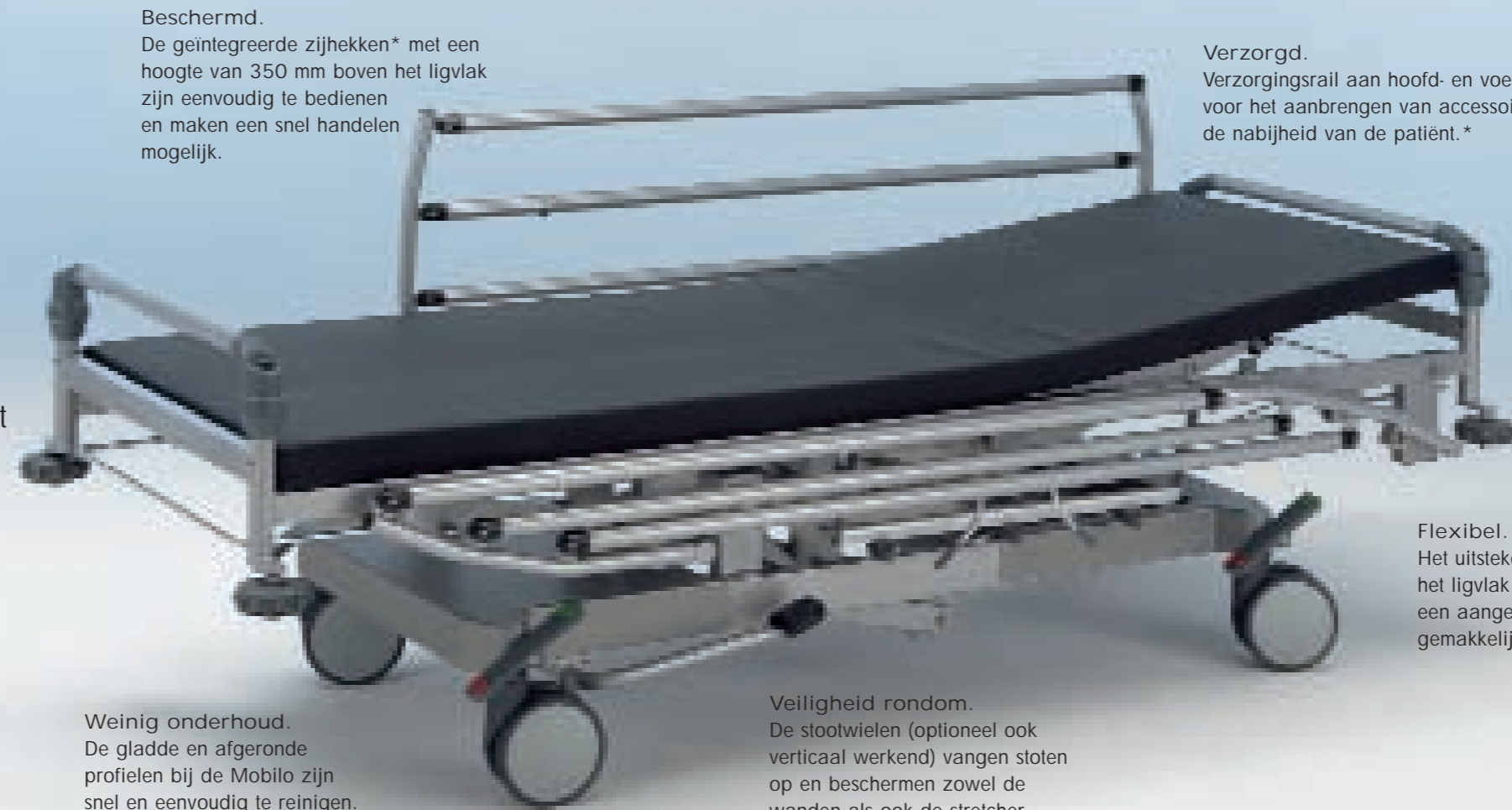

Beschermd.
De geïntegreerde zijhekken* met een hoogte van 350 mm boven het ligvlak zijn eenvoudig te bedienen en maken een snel handelen mogelijk.



Verzorgd.
Verzorgingsrail aan hoofd- en voeteneinde voor het aanbrengen van accessoires in de nabijheid van de patiënt.*

Comfortabel.
De eenvoudig te vervangen kussens (optioneel in visco-elastische kwaliteit) bieden ook bij langere ligtijden een optimaal comfort en zijn eenvoudig te reinigen. Het ligvlak is met 70 x 200 cm royaal bemeten.

Flexibel.
Het uitstekende hoogteverstelbereik van het ligvlak van 45-80 cm garandeert een aangename werkhoogte en een gemakkelijk in- en uitstappen.

Weinig onderhoud.
De gladde en afgeronde profielen bij de Mobilo zijn snel en eenvoudig te reinigen.

Veiligheid rondom.
De stootwielen (optioneel ook verticaal werkend) vangen stoten op en beschermen zowel de wanden als ook de stretcher.

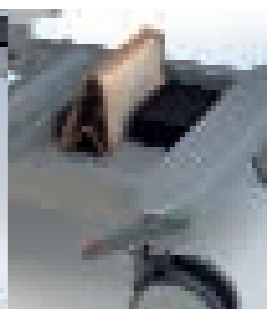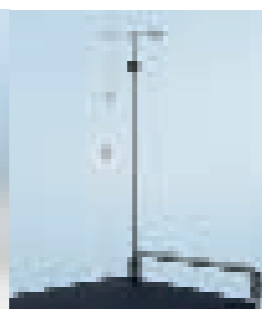

Voor ieder gebruik geschikt. Het driedelige ligvlak (optioneel) biedt veelvoudige verstelmogelijkheden en beschikt over gemakkelijk te bereiken bedienelementen aan weerszijden.

Praktisch. De duwbeugels beschikken over een huls voor infuusstandaards. Eenvoudig te verwijderen.

Veilig in het spoor. De wielen met rempeedaal kunnen vanuit alle vier hoeken worden bediend. (Optioneel 200 mm integrale wielen).

Patiëntenvriendelijk. De lage in- en uitstaphoogte van 45 cm ligvlakhoogte verbetert de mobiliteit van de patiënt. In geval van nood is het ligvlak in Trendelenburg te plaatsen.


Goed te doorzien. Aangename werkhoogte van 80 cm. Het röntgen doorlatend ligvlak is zonder problemen met de C-boog te bereiken.

Flexibel. De röntgen doorlatende rugsteun met houder* voor röntgencassettes.

Eenvoudig te bereiken. Goed te bereiken accessoires voor de optimale verzorging van de patiënten.

Doelmatig. Gemakkelijk te reinigen opbergvak met veel ruimte voor de spullen van de patiënt en voor de zuurstoffles.

Functioneel. Veelvoudige bewaarmogelijkheden door het op de zijhekken gemonteerde dienblad.*

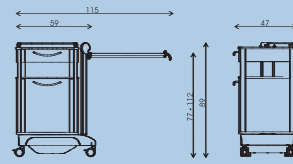

Deze nachtkast is niet alleen door zijn functionaliteit aantrekkelijk, maar ook door zijn frisse design. Met gepatenteerde extra's zoals de draaibare romp en vrijstaand bedtafeltje is Vitano het visitekaartje voor een veeleisende ziekenhuisinrichting.



ERGONOMIE

Hoogste kwaliteit in de verzorging van de patiënt. Vitano: Een eenvoudig te onderhouden, gepatenteerd systeem dat het dagelijks werk van het personeel aanzienlijk vereenvoudigt.



Keurig. Extra opbergruimte biedt de extra lade onder de romp.*



Ruimtebesparend. Uit te schuiven lade met kunststof lade-inzet en flessenhouder.



Comfortabel. De bedtafel kan traploos in hoogte worden versteld en kan als leeshulp schuin gezet worden. vuilwerend, krasvast ABS oppervlak.

FUNCTIONALITEIT

Draaibare romp, vrijstaand bedtafeltje en optioneel vast te zetten dubbele loopwielen: functioneel, praktisch en eenvoudig te bedienen. Dat zijn slechts enkele van de detailoplossingen van Vitano.



Gepatenteerd. Een handgreep is voldoende. De ca. 240° draaibare romp beweegt zich in de richting van de patiënt en is zodoende voor beide bedkanten inzetbaar. De achterkant is gesloten.



Praktisch. Een koelkast die levensmiddelen binnen handbereik vers houdt.*

Mobiel. Dubbele loopwielen* voor gemakkelijke verrijdbaarheid, optioneel beremd.

ESTHETICA


Welzijn is een effectieve succesfactor bij het genezingsproces. Vitano biedt een design dat een sterke techniek door een nieuwe vormgeving harmonisch met de ziekenhuiswereld verbindt.



Goed in de hand. Ergonomisch gevormde handgrepen in modern design.




Doelmatig. De beugel is multifunctioneel.

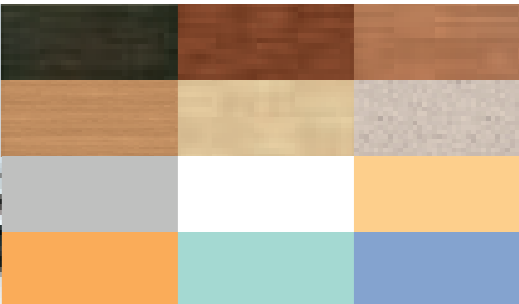

Kleurrijk. Passend bij de ziekenhuisbedden bestaat er voor de frontjes van de schuifladen van poedergecoat aluminium of in houtoptiek een aantrekkelijke keuze aan kleuren.**

*Extra uitvoering

**Ons complete kleurenaanbod vindt u op pagina 56.

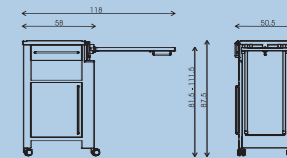

Tijdeloos, buitengewoon stabiel, flexibel in te zetten en eenvoudig te bedienen: bij het zien van deze eigenschappen heeft Stabilo zich tot een echte musthave onder de ziekenhuis-nachtkastjes ontwikkeld.



ERGONOMIE

Hoogste kwaliteit in de verzorging van de patiënt. Goed doordachte details maken Stabilo zo praktisch – voor zowel de patiënten, het verzorgingspersoneel als het reinigingspersoneel.



Decent. Onder de romp van Stabilo biedt een houder ruimte voor een steek.

Veelzijdig. Deuren aan weerszijden, naar beide kanten uit te schuiven lade.

Comfortabel. De zijdelingse bed-tafel is in hoogte verstelbaar. En zwenkbaar.

Hygiënisch. De rand van de nachtkast is aan alle hoeken onderbroken.

FUNCTIONALITEIT

Stabilo laat geen wensen onvervuld. Met betrouwbare techniek en vele opties kan het nachtkastje op de individuele eisen van de patiënt worden ingericht.




Doelmatig. Verschillende houdersystemen voor telefoons maken het gebruik van alle gebruikelijke telefoonmodellen mogelijk.*

Praktisch. Geïntegreerde koelkast die levensmiddelen binnen handbereik vers houdt.*

Mobiel. Stabiele dubbele loopwielen zorgen voor verrijdbaarheid.

ESTHETICA

Welzijn is een effectieve succesfactor bij het genezingsproces. Stabilo biedt een beproefde en degelijke vormgeving.

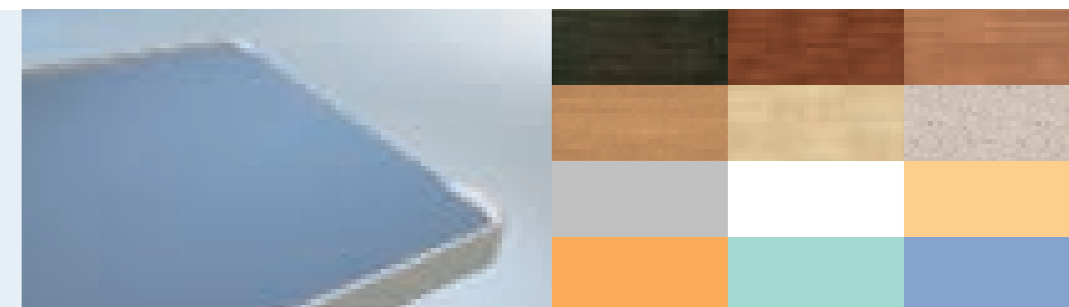


Hoogwaardig. De uitstekende afwerking van naden en kanten garandeert een bijzondere bestendigheid en reinigingsvriendelijkheid.

Kleurrijk. Bovenplateau en bed-tafel kunnen aan de kleuren van de hoofden-voeteneindborden van de ziekenhuisbedden van Stieglmeyer worden aangepast.***

*Extra uitvoering
**Rem optioneel
***Ons complete kleurenaanbod vindt u op pagina 56.

Lettino

IDEAAL voor de eerste uren samen

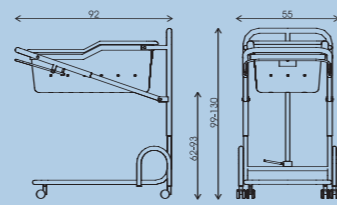


De eerste gezamenlijke uren van mama, papa en baby staat niets meer in de weg: de babywagen Lettino* met zijn uitneembare korf voor de pasgeboren baby kan direct aan het ziekenhuisbed van de moeder worden gereden.



Carino

Meer RUIMTE voor de kleintjes

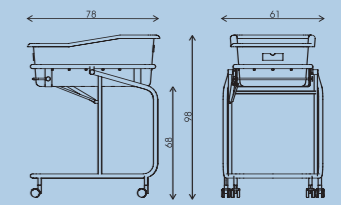

In babyafdelingen ontbreekt er vaak ruimte. De babywagen Carino* biedt de oplossing: de Carino-babywagens kunnen in elkaar gerold worden en ruimtebesparend opgeborgen worden. Ook bij mobiel gebruik biedt Carino dankzij hoogwaardige afwerking een perfecte oplossing.



Kalmerend. De babykorf kan naar behoefte met ca. 14° in Trendelenburg/anti-Trendelenburg worden versteld.

Aantrekkelijk. Goed zichtbaar naambordje. De baby kan door iedereen bij de naam worden genoemd. Verwisselingen worden voorkomen.

Flexibel. Lettino is eenvoudig in hoogte verstelbaar.

Kalmerend. Voor een goed contact, Carino kan tot 15° anti-Trendelenburg worden versteld.

Tijdsbesparend. Met een klem kunnen meerdere babywagens worden gekoppeld en verplaatst.

Ruimtebesparend. In elkaar geschoven nemen de babywagens nog maar 2/3 ruimte in.

Ravello. Verstelbare rugsteun, optimale zitpositie, ergonomische vorm: reeds de basisversie van Ravello verenigt alle eigenschappen van een goede transportstoel.



Ravello curio. De premium-variant Ravello curio is de ideale transportstoel voor de dagelijkse verzorging. Ravello curio biedt behalve een optimaal zitcomfort ook uitstekende ligkwaliteiten.



Ravello sano. De voetsteun vereenvoudigt moeilijk lopende patiënten het in- en uitstappen aanzienlijk. De comfortabele ligpositie blijft bestaan.



Ravello plus. Dankzij de hoogteverstelling van het zitvlak maakt Ravello plus lichamelijk gehandicapte patiënten het gaan zitten en opstaan eenvoudiger.



Comfortabel. Wellness is troef. De ligpositie is geschikt voor het herstel na een ambulante behandeling (niet bij Ravello plus).



Flexibel. Met aan de patiënt aan te passen zithoogte (tussen 51 cm en 80 cm) maakt Ravello plus het gaan zitten en opstaan eenvoudiger.




Comfortabel. Het zitvlak van de Ravello plus biedt een geïntegreerde opstahulp die ook bij het gaan zitten het gevoel van zekerheid geeft. De armleniging is in hoogte verstelbaar.

Toebehoren



Praktisch. Het aan te brengen tableau zorgt voor meer comfort.

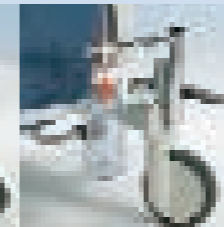

Decent. Twee hulzen aan de achterkant ter bevestiging van de accessoires.



Mobiel. Ook de infuusstandaard kan in de huls aan de achterkant worden geplaatst.



Stabiel. De extra kussens geven vooral zwakke patiënten extra steun.




Veilig. De aan te brengen lende- en hoofdsteunen bieden nog meer steun en veiligheid.



Voorzichtig. Steunen voor de veilige ligging van verwonde benen.*

In ziekenhuizen speelt het herstel van maar ook de preventie voor de patiënten een centrale rol. Stieglmeyer biedt ligsystemen aan die decubitus voorkomen en gelijktijdig het comfort en het welzijn van de patiënten verhogen.

Hoogwaardige bekledingen. De eenvoudig te reinigen PU-hoes van Stieglmeyer reduceert stofemissie en optimaliseert de infectiebescherming.

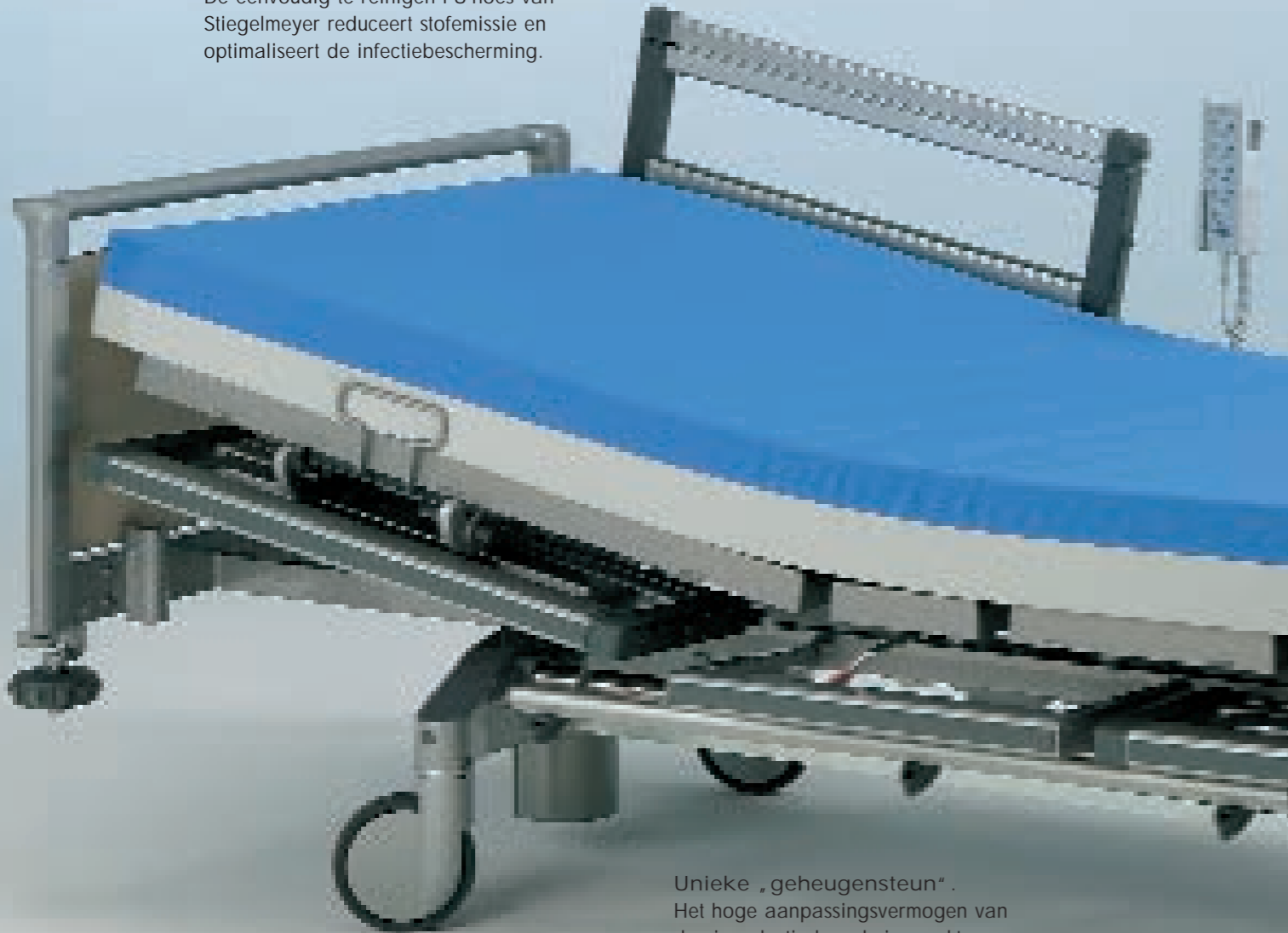

Unieke „geheugensteun“. Het hoge aanpassingsvermogen van de viscoelastische schuim werkt pijnverzachtend en voorkomt decubitus.

visco-elastische COMFORT-matras met PERLASTIC®-hoes

1-delig, met 2 lagen
4 cm visco-elastische polyurethaanschuim, RG 50
8 cm polyether-koudschuim, RG 40



Comfortabel. De visco-elastische comfortmatras vervormt zich door lichaamsgewicht en -warmte comfortabel en aangenaam.

visco-elastische MULTIFUNCTIE-matras met PERLASTIC®-hoes

1-delig, met 3 lagen, 2 cm polyether-koudschuim, RG 40, 7 cm visco-elastische polyurethaanschuim, RG 50, 5 cm polyether-koudschuim, RG 40



Comfortabel. De drie lagen uit polyether-koudschuim met visco-elastische schuim van de multifunctie-matras ondersteunen alle ligsystemen. (Vooral voor zware patiënten.)

visco-elastische ANTIDECUBITUS-matras met PERLASTIC®-hoes

1-delig, met 2 lagen,
7 cm visco-elastische polyurethaanschuim, RG 50,
5 cm polyether-koudschuim, RG 40



Bevordert het bloedtransport. De visco-elastische antidecubitus-matras van Stieglmeyer voorkomt effectief tegen doorliggen.

KOUDSCHUIM-matras met PERLASTIC®-hoes


1-delig, met 1 lagen
12 cm polyether-koudschuim, RG 40



Aangenaam. De koudschuim-matras met open poriën zorgt voor een betere ventilatie en betere weggeleiding van vochtigheid en zodoende voor een aangenaam ligcomfort.

Standaard MATRASSEN en HOEZEN

De kussensteunen van Stieglmeyer bezitten een kern van polyether-schuim volgens DIN 13014. Bijvoorbeeld kussensteun 8593 met twee rechte insnijdingen en een wigvormige uitsparing voor verzorgingsbedden met een uit vier delen bestaand ligvlak.

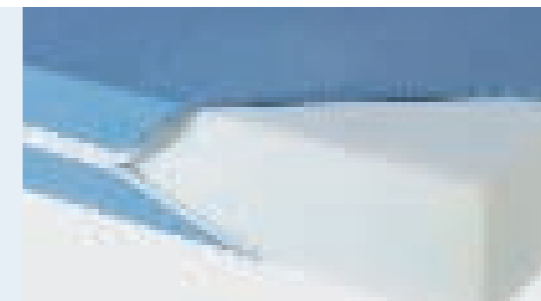

Hoes: elastische hygiënestof, slangweefsel, wasmachinevaste geweefde stoffen, afneembaar en desinfecteerbaar tot 105 °C of afwasbare PU-hoes rondom (optioneel).

Toebehoren

Praktische EXTRA'S ter keuze




Binnenbouw papegaai laat zich zowel links als rechts aan het bed plaatsen. Triangel inclusief.



Handgreep Vigo plus individueel in te stellen: uit kort wordt lang een druk op de knop is voldoende.



Papegaai met dubbele infuushaken voor het aanbrengen van infusen aan de papegaai.

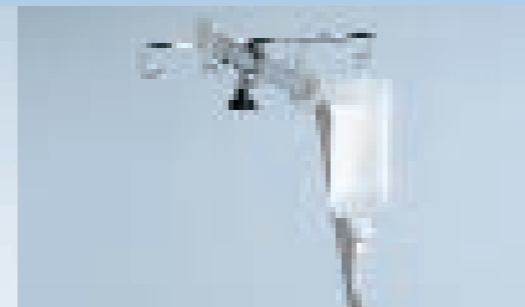

Klembare infuushouder. Met een klem direct aan de papegaai te bevestigen.



Gebogen infuuspaal (2 kg) wordt in de standaard aanwezige huls geplaatst. Hij beschikt over vier haken en is in de hoogte verstelbaar.



Infuuspaal 6331 recht wordt in de standaard aanwezige huls bevestigd. Hij beschikt over vier haken en is in hoogte verstelbaar.




Snel bij de hand en decent aangebracht: de urinaalhouder en de universele beugel passend in de verzorgingsrail.



Handdoekhouder inclusief haak voor washandjes, gemakkelijk plaatsbaar aan het hoofdeinde.



Infuuspaal met vier haken (5 kg) is bijzonder stabiel en geschikt voor het aanbrengen van meerdere grote infusen of spoelingen.*

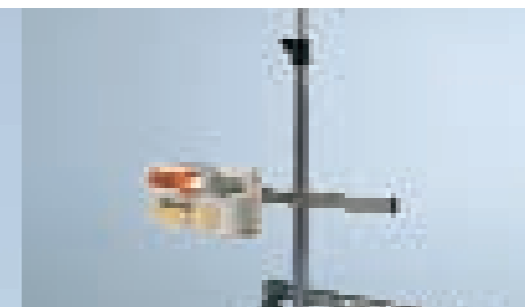

Norm-klemrail voor het aanbrengen aan de infuusstandaard en ter bevestiging van extra apparaten.



Pomphouder is in hoogte verstelbaar en is geschikt voor de bevestiging van infusiepompen en andere apparaten.*



Klem voor het aanvullend aanbrengen van toebehoren (bv pompen en dergelijke) aan het bedframe.




Flexibele handsethouder. Steeds bij de hand, individueel instelbaar, flexibel.



Naamkaarhouder uit transparant plexiglas. Voor het persoonlijk contact met de patiënt.



Dossierhouder voor het bewaren van tijdschriften en documenten van de patiënt. Universeel in te zetten aan het ziekenhuisbed en nachtkastje.

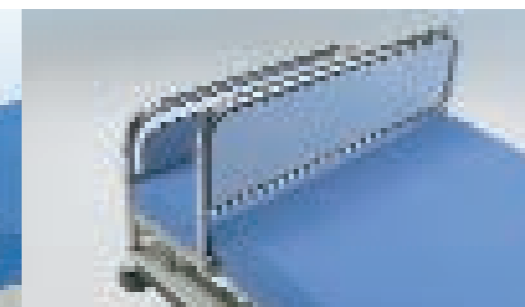

Voetsteun. Verchroomd frame uit stalen buizen met kunststofplaat uit volkunststof, kan aan de onderbeensteun worden bevestigd.



Schrijfplateau. Universeel in te zetten, praktisch inklapbaar, eenvoudig te positioneren.

Toebehoren

Praktische EXTRA'S ter keuze

Toebehoren intensieve verpleging



Leeslampje Sola met adapter in de papegaihuls resp. aan de papegaai van het ziekenhuisbed aan te brengen. Met flexibele arm in alle richtingen te verstellen.



LED-lamp Ledi is al door licht contact te bedienen en energiebesparend. Voor het aanbrengen in de papegaihuls resp. aan de papegaai van het ziekenhuisbed.



Houder voor krukken aan het bed of aan het nachtkastje. De krukken zijn veilig opgeborgen en eenvoudig voor patiënten te bereiken.



Adapter met spanrail voor het aan het hoofdeinde aanbrengen van extra toestellen (het hoofdbord kan worden weggeklapt).



Spanrail eenvoudig in te hangen, aan hoofd- en voeteneinde in te zetten voor het aanbrengen van extra apparaten.



Klem ter bevestiging aan het spanrail.



Door het eenvoudig te vervangen extensiehoofd aan het voeteneinde, kunnen extensies veilig worden aangebracht.




Het praktische verbindingselement tussen de gedeelde zijhekken sluit de open ruimte veilig. Het ligvlak blijft dankzij de flexibele ophanging verder volledig bedienbaar.



Bedhekseschemhoes voor de doorlopende zijhekken biedt vooral onrustige patiënten effectieve bescherming.



Zijhek 5300 afzonderlijk neer te laten ter bevestiging aan de spanrails. Vereenvoudigt de toegang en de verzorging van de patiënten.

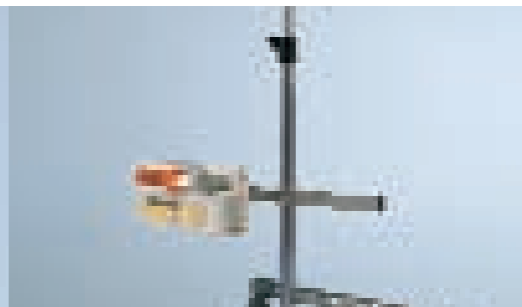

Afdekkappen uit schuimleer voor de zijhek 5300 bieden vooral onrustige patiënten een effectieve bescherming.



Zijhek 6639 omlaag te zwenken, eenvoudig en snel te bedienen. De hoofd- en voeteneinden blijven vrij toegankelijk.



Zijhek 6637, doorlopend, biedt patiënten effectieve bescherming tegen een uit het bed vallen. In een handomdraai aan het hoofd- en voetenbord te monteren.



Ruimtebesparend één balk zijhek 6638 – met in het midden als U-profiel. Voor het eenvoudig uitstappen en een betere bereikbaarheid van de bedienelementen.



Zijhek 6638, met vier balken. Het verhoogde zijhek biedt aanvullende bescherming bij de inzet van antidecubitus-systemen (51 cm boven het ligvlak).



Vormkussen, tweedelig, voor Sicuro plus. Bijzonder ontlastend door visco-elastische schuim. Voor het comfortabel positioneren van de patiënt bij lateraal zwenken van het bed.















Zuurstoffleshouder voor het plaatsen in de klem of papegaihuls aan het hoofdeinde. Zorgt voor een veilig transport van de zuurstoffles bij beademingspatiënten.







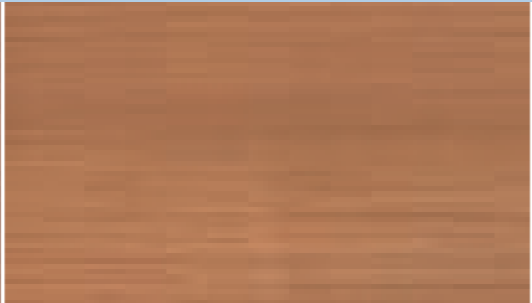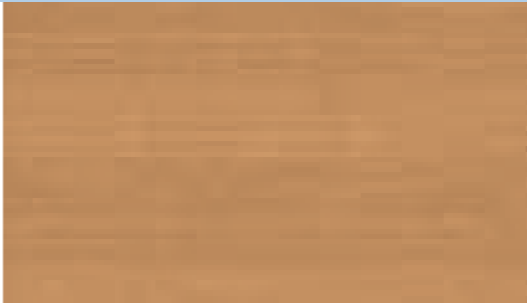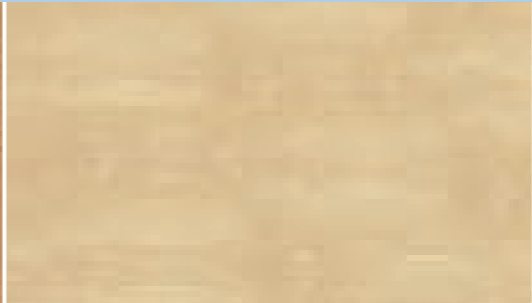

Monitortafel voor plaatsing in de klem of papegaihuls. De stabiele metalen tafel is in alle kanten draaibaar en in hoogte te verstellen.

Clinic Kleuren

Kleuren en decors



					
Eiken donker Resopal 4318-60	Calvados Resopal 4328-60	Kersen Resopal 4326-60	Beuken Resopal 4307-60	Ahorn Resopal 4101-60	Marmewit Resopal 4875-60
					
Zilvergrijs Resopal D 381-60	Wit Resopal 9417-60	Goudgeel Resopal 0446-60	Zongeel Resopal 0424-60	Jadegroen Resopal 0670-60	Azuurblauw Resopal 0744-60

Accentkleuren Vitano

					
Accentkleur kristalwit passend bij decor wit	Accentkleur crèmegeel passend bij decor goudgeel	Accentkleur jadegroen passend bij decor jadegroen	Accentkleur pastelblauw passend bij decor azuurblauw	Beuken	Ahorn

Bordkleuren Vitano

Frame kleuren

	
Kristalwit	Argentum

Technische informatie

Resopal
Decoratieve multiplexplaten met melaminhars-deklaag volgens DIN EN 438. Beproefd wegens de buitengewone bestendigheid (tegen krassen, stoten, UV- en andere stralen) en weerstandsvermogen bij mechanische en thermische belasting (volgens EN 438, NFT 54301 en

ISO 4538). Niet ontvlambaar en bestendig tegen hitte tot 180°C. Bovendien is Resopal noch reactief noch corrosief. Resopaloppervlakken zijn fysiologisch onschadelijk en voor het contact met levensmiddelen volgens EN 1186 toegelaten.

Onderhoud, verzorging, reiniging
Alle Resopal-oppervlakken kunnen met zachte zeepoplossingen worden gereinigd. Bij hardnekkige verontreinigingen ook met oplosmiddelen. Het gebruik van schuurpoeder dient te worden voorkomen. Probleemloze desinfectie met behulp van in ziekenhuizen gebruikelijke desinfectiemiddelen* en de inzet van heet water.

Poedercoating
De poedercoating vertoont uitstekende kwaliteiten. De hoge kleurafdekking en het hoog hechtingsvermogen beschermt het bed. De coating is slag- en stootvast. Zelfs bij belasting en temperatuurwisselingen vormen zich geen microscheuren. Bovendien heeft de poedercoating geen

allergene eigenschappen en is onschadelijk voor de huid en vrij van zytotoxische uitwerkingen (volgens DIN EN ISO 10993-1).

Onderhoud, verzorging, reiniging
Een reiniging met gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen is mogelijk de poedercoating is bestand tegen temperaturen (glasovergangstemperatuur 80°) en is geschikt voor machinale reiniging.

*Volgens gegevens van de fabrikant gedoseerd
Geringe kleurafwijkingen voorbehouden

Clinic Kleuren

Seta

Avanta

Vitano

Vivendo

Sicuro

Nachtkastje Vitano

Nachtkastje Stabilo



Framekleuren (onderstel/matrasframe)

	Kristalwit	●	●	●	●	●	●	●	●
	Argentum	●	●	—	●	—	—	●	●

Hoofd-/voeteneinde borden



Seta base Seta flex



Avanta plus Avanta classic



Vitano Standaard Vitano Valero



Vivendo Standaard Vivendo Valero



Sicuro Standaard Sicuro Valero

Kleuren en decors (Resopal)

	Eiken donker	●	●	—	●	●	●	●	●
	Calvados	●	●	—	●	●	●	●	●
	Kersen	●	●	—	●	●	●	●	●
	Beuken	●	●	—	●	●	●	●	●
	Ahorn	●	●	—	●	●	●	●	●
	Marmerswit	●	●	—	●	●	●	●	●
	Zilvergrijs	●	●	—	●	●	●	●	●
	Wit	●	●	—	●	●	●	●	●
	Goudgeel	●	●	—	●	●	●	●	●
	Zongeel	●	●	—	●	●	●	●	●
	Jadegroen	●	●	—	●	●	●	●	●
	Azuurblauw	●	●	—	●	●	●	●	●

Fronten v.d. schuifladen (HPL-kunststof)

Bedtafel en bovenplateau

Accentkleuren Vitano (alu, poederlak)

	Kristalwit	—	—	●*	—	—	—	—	—
	Crèmegeel	—	—	●*	—	—	—	—	—
	Jadegroen	—	—	●*	—	—	—	—	—
	Pastelblauw	—	—	●*	—	—	—	—	—

Fronten v.d. schuifladen alu, poederlak

Bordkleuren (alu, met folie)

	Beuken	—	—	●	—	—	—	—	—
	Ahorn	—	—	●	—	—	—	—	—

● leverbaar — niet leverbaar * incl. romp en zijbekleding

● leverbaar — niet leverbaar

Clinic Technische parameters

Seta

Afmetingen en gegevens		Verstelmogelijkheden	
Ligvlak:	900 x 2000 mm	Trendelenburg:	tot 18°
Buitenafmetingen:	1030 x 2180 mm	anti-Trendelenburg:	tot 18°
Verdeling van het ligvlak:	824/200/360/526 mm	Hoogteverstelling van het ligvlak:	370 tot 820 mm
Doorsnede van de wielen:	150 mm	Verstelling rugsteun:	tot ca. 70°
Veilige werklast:	225 kg	Verstelling bovenbeensteun:	tot ca. 40°
Maximaal hefvermogen:	250 kg		
Bodemvrijheid:	165 mm		
Totaal gewicht:	ca. 140 kg		

- Elektromotorische uitrusting**
- Inzet van een vermogenssterke ringkertrafo
 - lage stroomopname
 - Hoge vermogensreserven voor een snel verstellen ook bij grote last
 - Geringe standby-stroomverbruik
 - Geringe elektrosmog
 - Ongevaarlijke 24 volt laagspanning
 - 5-voudige zekerheid tegen overbelasting en oververhitting

- 2-voudig motorzijdig (zelfresettende, onderhoudsvrije overstromuilschakeling)
- 3-voudig netzijdig (twee primaire zekeringen, een thermostekering in de trafo)
- Eenvoudig en snel te vervangen hoogwaardige EPR-nettoevoer
- Duurzaam accu-pakket
- Automatische nulpositie
- Leverbaar met blokkeerbox of verwijderbare regelbox (optie) in de dekendrager
- 2-kleurige LED van de blokkeerstatus van de verstelfuncties
- Verwijderbare regelbox met de volgende kenmerken/opties:
 - drie vooraf te programmeren ligvlakinstellingen
 - vrij te programmeren ligvlakinstellingen
 - vier afzonderlijk te blokkeren verstelfuncties

Sicuro/Sicuro plus

Afmetingen en gegevens		Verstelmogelijkheden	
Ligvlak:	900 x 2000 mm	Trendelenburg:	tot ca. 12°
Buitenafmetingen:	ca. 950 x 2143 mm	anti-Trendelenburg:	tot ca. 12°
Verdeling van het ligvlak:	800/200/400/600 mm	Hoogteverstelling van het ligvlak:	ca. 450-810 mm
Doorsnede van de wielen:	150 mm	Verstelling rugsteun:	tot ca. 70°
Veilige werklast:	175 kg	Verstelling bovenbeensteun:	tot ca. 80°
Maximaal hefvermogen:	225 kg		
Bodemvrijheid:	ca. 50 mm		
Totaal gewicht:	ca. 170 kg		

- Flexibele uitvoering met 1-3 motoren mogelijk
- Inzet van een vermogenssterke ringkertrafo
 - lage stroomopname
 - geringe elektrosmog
 - Ongevaarlijke 24 volt laagspanning
- Bescherming tegen overbelasting en oververhitting
 - 2-voudig motorzijdig
 - 3-voudig netzijdig
- Eenvoudig en snel te vervangen hoogwaardige EPR-nettoevoer en accu-pakket
- Geen accu voor het instellen van de trendelenburg noodzakelijk
- Blokkeringsbox (vanaf twee motoren) ter blokkering van afzonderlijke ligvlakverstellingen

- Flexibele uitvoering met 1-3 motoren mogelijk
- Inzet van een vermogenssterke ringkertrafo
 - lage stroomopname
 - geringe elektrosmog
 - Ongevaarlijke 24 volt laagspanning
- Bescherming tegen overbelasting en oververhitting
 - 2-voudig motorzijdig
 - 3-voudig netzijdig
- Eenvoudig en snel te vervangen hoogwaardige EPR-nettoevoer en accu-pakket
- Geen accu voor het instellen van de trendelenburg noodzakelijk
- Blokkeringsbox (vanaf twee motoren) ter blokkering van afzonderlijke ligvlakverstellingen

- Elektromotorische uitrusting Sicuro plus**
- Compleet motorisch te verstellen (5 motoren)
 - 4-voudige handmatige snelverstelling van de aandrijvingsmotoren zorgt voor extra flexibiliteit en veiligheid in gevallen van nood
 - Inzet van een vermogenssterke ringkertrafo
 - lage stroomopname
 - geringe elektrosmog
 - Ongevaarlijke 24 volt laagspanning
 - Bescherming tegen overbelasting en oververhitting
 - 5-voudig motorzijdig
 - 4-voudig netzijdig
 - Eenvoudig en snel te vervangen hoogwaardige EPR-nettoevoer en accu-pakket
 - Microprocessorregeling
 - automatische nulpositie
 - vast geprogrammeerde bedposities (trendelenburg) met een druk op de knop uit willekeurige positie snel te bereiken
 - Een individueel te programmeren bedpositie
 - in de dekendrager: de dekendragergeïntegreerde, verwijderbare regelbox ter bediening en blokkering van afzonderlijke verstelfuncties door het ziekenhuispersoneel

Avanta

Afmetingen en gegevens		Verstelmogelijkheden	
Ligvlak:	900 x 2000 mm	Trendelenburg:	tot ca. 16°
Buitenafmetingen:	ca. 1010 x 2150 mm	anti-Trendelenburg:	tot ca. 13°
Verdeling van het ligvlak:	853/190/320/541 mm	Hoogteverstelling van het ligvlak:	ca. 420-830 mm
Doorsnede van de wielen:	150 mm	Verstelling rugsteun:	bis ca. 70°
Veilige werklast:	225 kg	Verstelling bovenbeensteun:	bis ca. 45°
Maximaal hefvermogen:	250 kg		
Bodemvrijheid:	ca. 150 mm		
Totaal gewicht:	ca. 150 kg		

- Elektromotorische uitrusting**
- Inzet van een vermogenssterke ringkertrafo
 - lage stroomopname
 - geringe elektrosmog
 - Ongevaarlijke 24 volt laagspanning
 - Bescherming tegen overbelasting en oververhitting
 - 2-voudig motorzijdig
 - 3-voudig netzijdig
 - Eenvoudig en snel te vervangen hoogwaardige EPR-nettoevoer en accu-pakket

- Accu optioneel
- Leverbaar met blokkeerbox of verwijderbare regelbox (microprocessorregeling) in de dekendrager
- Microprocessorregeling met de volgende kenmerken/opties:
 - voetschakelaar (ook bij blokkeringsbox)
 - automatische nulpositie
 - vast geprogrammeerde bedpositie (shockstand/ook bij blokkeringsbox)
 - Individueel te programmeren ligvlakhoogte en -zwenking
 - Alarmsignaal bij ingestoken netkabel en losgezette rem
 - Verlichting onder het bed

Mobilo

Afmetingen en gegevens		Verstelmogelijkheden	
Ligvlak:	700 x 2000 mm	Trendelenburg:	tot 15°
Buitenafmetingen:	863 x 2178 mm	anti-Trendelenburg:	tot 12°
Verdeling van het ligvlak:	850/480/670 mm ¹	Hoogteverstelling van het ligvlak:	ca. 450-800 mm
Doorsnede van de wielen:	150 mm	Verstelling rugsteun:	tot ca. 70°
Veilige werklast:	175 kg	Verstelling bovenbeensteun:	tot ca. 45° ¹
Bodemvrijheid:	ca. 75 mm		
Totaal gewicht:	ca. 120 kg		

- Accu optioneel
- Leverbaar met blokkeerbox of verwijderbare regelbox (microprocessorregeling) in de dekendrager
- Microprocessorregeling met de volgende kenmerken/opties:
 - voetschakelaar (ook bij blokkeringsbox)
 - automatische nulpositie
 - vast geprogrammeerde bedpositie (shockstand/ook bij blokkeringsbox)
 - Individueel te programmeren ligvlakhoogte en -zwenking
 - Alarmsignaal bij ingestoken netkabel en losgezette rem
 - Verlichting onder het bed

Ravello

Afmetingen en gegevens		Verstelmogelijkheden	
Ligvlak:	900 x 2100 mm	Trendelenburg:	tot ca. 12°
Buitenafmetingen:	ca. 950 x 2255 mm	anti-Trendelenburg:	tot ca. 12°
Verdeling van het ligvlak:	825/210/385/575 mm	Hoogteverstelling van het ligvlak:	ca. 430-800 mm
Doorsnede van de wielen:	150 mm	Verstelling rugsteun:	tot ca. 70°
Veilige werklast:	225 kg	Verstelling bovenbeensteun:	tot ca. 40°
Maximaal hefvermogen:	225 kg		
Bodemvrijheid:	ca. 180 mm		
Totaal gewicht:	ca. 150 kg		

- Elektromotorische uitrusting**
- Inzet van een vermogenssterke ringkertrafo
 - lage stroomopname
 - geringe elektrosmog
 - Ongevaarlijke 24 volt laagspanning
 - Bescherming tegen overbelasting en oververhitting
 - 2-voudig motorzijdig

- 4-voudig netzijdig
- Eenvoudig en snel te vervangen hoogwaardige EPR-nettoevoer en accu-pakket
- Microprocessorregeling
 - automatische nulpositie
 - Twee vast te programmeren bedposities (nulstand + shockstand)
 - Een individueel te programmeren bedpositie
 - in de dekendrager geïntegreerde, verwijderbare regelbox ter bediening en blokkering van afzonderlijke verstelfuncties door het ziekenhuispersoneel
- Aanvullende inzet van een afzonderlijke handschakelaar mogelijk

Ravello / Afmetingen en gegevens		Ravello-Plus / Afmetingen en gegevens		Onderstel:	stabiele pijp, voorste wielen: ø 200 m, vaststaande achterste wielen: ø 150 (125) mm, draaibaar, vast te zetten, banden: PUR met staal versterkte kunststof, bodemvrijheid 80 mm, kantelzeker, slipvrije oppervlakte PU-schuim met houten kern, ruimtegewicht 50 kg/m3, sterkie 80 mm
Totale breedte:	680 mm	Totale breedte:	730 mm	Voetsteun:	PU-schuim met staalkern, anatomisch gevormd, door gasdrukveren verstelbaar, met zitvlak gesynchroniseerd, anatomisch gevormde hoofdsteunen met verstelbaar nekussen
Totale hoogte:	1260 mm	Totale hoogte:	1320 tot 1610 mm	Zitvlak:	PU-schuim gecoat, brede armleuningen voor een goede houding van de onderarm, hoogteverstelling in 6 trappen, op hoogte van het zitvlak in te stellen
Totale diepte:	800 mm	Totale diepte:	830 mm	Rugsteun:	kunstleer (PVC), volledig waterdicht
Zitvlak:	500/450/450 mm	Zitvlak:	500/510-800/460 mm	Rugsteun:	B2 (stof M1)
Zitvlak:	810 mm hoogte, 23° verstelbaar	Zitvlak:	810 mm hoogte, 23° verstelbaar		
Rugsteun:	320 x 270 mm	Rugsteun:	330 x 250 mm, omhoog te klappen		
Voetsteun:	320 x 270 mm	Voetsteun:	330 x 250 mm, omhoog te klappen		
Totaal gewicht:	33 kg	Totaal gewicht:	58 kg		

Ravello-Curo / Afmetingen en gegevens		Ravello-Sano / Afmetingen en gegevens		Armeuning:	PU-schuim gecoat, brede armleuningen voor een goede houding van de onderarm, hoogteverstelling in 6 trappen, op hoogte van het zitvlak in te stellen
Totale breedte:	680 mm	Totale breedte:	680 mm	Bekleding:	kunstleer (PVC), volledig waterdicht
Totale hoogte:	1260 mm	Totale hoogte:	1260 mm	Brandbe-	
Totale diepte:	980 mm	Totale diepte:	980 mm	schermklasse:	B2 (stof M1)
Zitvlak:	500/450/450 mm	Zitvlak:	500/450/450 mm		
Rugsteun:	8810 mm hoogte, 43° verstelbaar	Rugsteun:	810 mm hoogte, 43° verstelbaar		
Voetsteun:	260 x 240 mm	Voetsteun:	260 x 240 mm, naar binnen te schuiven		
Totaal gewicht:	38 kg	Totaal gewicht:	38 kg		

Ravello-Curo / Afmetingen en gegevens		Ravello-Sano / Afmetingen en gegevens		Armeuning:	PU-schuim gecoat, brede armleuningen voor een goede houding van de onderarm, hoogteverstelling in 6 trappen, op hoogte van het zitvlak in te stellen
Totale breedte:	680 mm	Totale breedte:	680 mm	Bekleding:	kunstleer (PVC), volledig waterdicht
Totale hoogte:	1260 mm	Totale hoogte:	1260 mm	Brandbe-	
Totale diepte:	980 mm	Totale diepte:	980 mm	schermklasse:	B2 (stof M1)
Zitvlak:	500/450/450 mm	Zitvlak:	500/450/450 mm		
Rugsteun:	8810 mm hoogte, 43° verstelbaar	Rugsteun:	810 mm hoogte, 43° verstelbaar		
Voetsteun:	260 x 240 mm	Voetsteun:	260 x 240 mm, naar binnen te schuiven		
Totaal gewicht:	38 kg	Totaal gewicht:	38 kg		

Vivendo

Afmetingen en gegevens		Verstelmogelijkheden	
Ligvlak:	900 x 2000 mm	Trendelenburg:	tot ca. 12°
Buitenafmetingen:	ca. 950 x 2143 mm	anti-Trendelenburg:	tot ca. 12°
Verdeling van het ligvlak:	795/330/350/480 mm	Hoogteverstelling van het ligvlak:	ca. 430-820 mm
Doorsnede van de wielen:	150 mm	Verstelling rugsteun:	tot ca. 70°
Veilige werklast:	175 kg	Verstelling bovenbeensteun:	tot ca. 90°
Maximaal hefvermogen:	250 kg (motorisch)		
Bodemvrijheid:	ca. 108 mm		
Totaal gewicht:	ca. 140 kg		

- Elektromotorische uitrusting**
- Flexibele uitvoering met 1-3 motoren mogelijk
 - Inzet van een vermogenssterke ringkertrafo
 - lage stroomopname
 - geringe elektrosmog

- Ongevaarlijke 24 volt laagspanning
- Bescherming tegen overbelasting en oververhitting
 - 2-voudig motorzijdig
 - 3-voudig netzijdig
- Eenvoudig en snel te vervangen hoogwaardige EPR-nettoevoer en accu-pakket
- Accu optioneel
- Geen accu voor het instellen van de trendelenburg noodzakelijk
- Blokkeringsbox (vanaf twee motoren) ter blokkering van afzonderlijke ligvlakverstellingen

¹ Bij driedelig ligvlak (optioneel)

Clinic Technische parameters

Uitvoering	Seta	Avanta	Vitano	Vivendo	Sicuro	Sicuro plus
Geschikt voor wasstraat (volgens AK-BWA)	○	○	●	○	●	●
Verstelling mechanisch						
Ligvlakhoogte	●	–	–	●	●	–
Rugsteun/bovenbeensteun	●	–	–	●	●	●
Onderbeensteun	●	●	●	●	●	●
Anti-trendelenburg/trendelenburg	●	–	–	●	●	●
Verstelling motorisch						
Hoogte/rug-/bovenbeensteun	○	●	●	○	○	●
Onderbeensteun	–	–	–	–	–	–
Anti-trendelenburg/trendelenburg	○	●	●	○	○	●
Autocontour	○	●	●	○	○	●
Lateraal zwenken	–	–	–	–	–	●
Blokkeerunit vast aan het bedframe	–	–	–	○	●	–
Blokkeerunit vast in de dekendrager	○	○	–	○	○	–
Bedieningspaneel verwijderbaar	○	○	●	○	–	●
Geheugenfunctie	○	–	●	–	–	●
Bediening in zijhek	–	–	●	–	–	–
Bediening via handschakelaar	○	●	○	○	○	●
Geïntegreerde zijhekken						
Doorlopende zijhekken	○	○ ¹	–	○	–	–
Gedeelde zijhekken	○	○	●	–	–	–
Gecombineerde zijhekken	○	–	–	–	–	–
Hoofdeinde- en voeteneinde borden						
Verwijderbaar	●	●	●	●	●	●
Vast	○	○	○	○	○	○
Vastzittend hoofdbord	–	○	–	–	–	–
Wielen						
Wielen van staalplaat	–	–	–	●	–	–
Integrale wielen	●	●	●	○	○	○
Dubbele wielen	○	–	○	○	●	●
Lastafhankelijke wiel	–	●	–	–	–	–
Stootwielen						
Horizontaal werkend	●	○	●	●	●	●
Aan hoofdeinde horizontaal en verticaal werkend	○	○	○	○	○	○
Aan voeteneinde horizontaal en verticaal werkend	○	○	○	○	○	○
Overige uitvoering						
Houders voor papegaai/infuusstandaard aan de binnenzijde	○	●	●	●	●	●
Geïntegreerde bedverlenging	●	●	–	●	●	●
Geïntegreerde dekendrager	●	●	●	●	●	●
Opname voor fixatiegordel fixatiepunt	○	●	●	●	●	●
Verzorgingsrail	●	●	●	–	–	–
Normspanrail	–	○	○	○	●	●
Flexibele handsethouder	○	○	○	○	○	○
Doorlopende zijhekken achteraf te bevestigen	○ ¹	○ ¹	○	○	○	○
Nachtkast-transportvoorziening	–	–	–	○	–	–
Onderstelafdekking	–	–	–	○	○	●
Ligvlak uit kunststof	●	●	○	○	○	●


● standaard ○ optioneel – niet leverbaar

¹ alleen met hoofd- en voetenbord Seta flex resp. Avanta classic

Deze tabel geeft uitsluitend de standaard van Stiegemeyer weer. Wij adviseren u graag omtrent de mogelijkheden van verdere klantenspecifieke detailoplossingen.

Drie antwoorden op de toekomst

Het perfecte PRODUCT

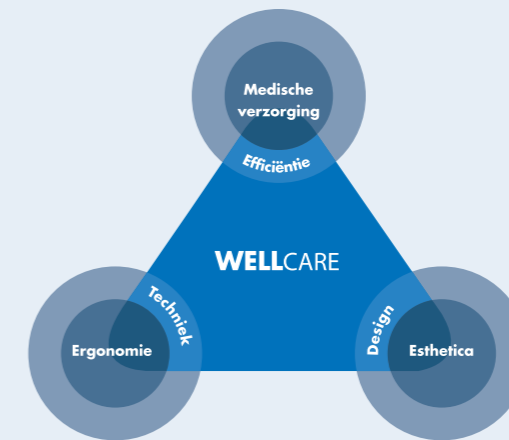

Het Stiegemeyer WELLCARE-concept is onze maatstaf voor producten, waarmee de patiënt zich op zijn best voelt. WELLCARE is de optimale balans van medische zorg, ergonomie en esthetica. Welzijn als systeem.

Het juiste ADVIES

De kwaliteit van de gecreëerde omgeving is voor het genezingsproces van de patiënt van groot belang: Stiegemeyer SUPPORT ondersteunt met behulp van adviessystemen de planning van ziekenhuizen en zorginstellingen niet alleen met betrekking tot de functionele uitvoering van bedden en nachtkastjes maar ook bij de binnenhuisarchitectuur van patiëntenkamers.

De efficiënte SERVICE

Ons serviceconcept voor bedden-onderhoudsmanagement – Stiegemeyer ASSIST – ondersteunt het prestatievermogen en de toekomstperspectieven van ziekenhuizen en zorginstellingen. Van logistiek tot onderhoud van bedden, alle processen en kosten worden geoptimaliseerd.

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford, Germany
Telefoon: +49 (0) 52 21/185-0
Fax: +49 (0) 52 21/185-252
E-Mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

